


श्रवण यन्त्र कसरी खोलने र बन्द गर्ने, र ब्याट्री कसरी परिवर्तन गर्ने

खोलने ब्याट

बन्द गर्दतपाईं

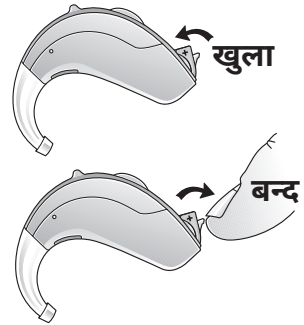

ब्याट्रीहरू परिवर्तन खोलने


ब्याट्रीको पावर कम हुँदा

- ब्याट्री सकिन थालेपछि तपाईंको श्रवण यन्त्रले बिप गर्नेछ।
- ब्याट्री पूर्ण रूपमा सकिन नपुग्नुजेल यो चेतावनी बिप प्रत्येक 15 मिनेटमा दोहोरिनेछ।

आफ्नो श्रवण यन्त्रहरू कसरी खोल्ने र बन्द गर्ने, र ब्याट्री कसरी परिवर्तन गर्ने (जारी)

ब्याट्री परिवर्तन गर्न

- नयाँ ब्याट्रीबाट टाँसिने लेबल हटाउनुहोस्।
- ब्याट्रीको ढोका खोल्नुहोस्।
- प्रयोग गरिएको ब्याट्रीलाई माथितिर तानेर हटाउनुहोस्।
- नयाँ ब्याट्रीलाई यसको ठाउँमा घुसाउनुहोस्। समतल पक्ष (+ चिन्ह लगाइएको) माथितिर फर्केको छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।

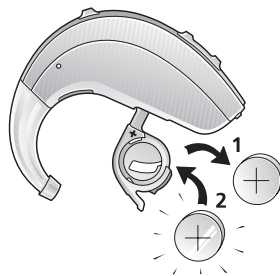

शीर्ष सुझाव:

ब्याट्री बचत गर्न, तपाईंले प्रयोग नगरेको बेला आफ्नो श्रवण यन्त्र बन्द गर्नुहोस्।



थप सहयोगको लागि, QR कोड स्क्यान गर्नुहोस् वा हाम्रो बिरामी सहायता पोर्टलमा जानुहोस्: danalogic.co.uk/patient-portal