

danalogic GN

डेनालोजिक एम्बियो स्मार्ट

ब्लूटूथतपाईंको नh® श्रव



तपाईंको नयाँ डेनालोजिक एम्बियो स्मार्ट श्रवण यन्त्रहरूमा ब्लुटूथ क्षमता छ।


यो राम्रो खबर हो किनकी यो सुविधाले तपाईंलाई धेरै फाइदाहरू दिन्छ जसमा तपाईंको फोनबाट ध्वनिहरू (कल, संगीत र अडियो) सिधै तपाईंको श्रवण यन्त्रहरू मार्फत सुन्न सक्षम हुनु समावेश छ।

यो सुविधा यहाँ सूची बद्ध स्मार्ट उपकरणहरूमा उपलब्ध छ:
www.danalogic.co.uk/connectivity

ब्लूटूथ श्रवण यन्त्रका फाइदाहरू

- श्रवण यन्त्र लगाएर फोन कल गर्नु गाह्रो हुन सक्छ। तपाईंको नयाँ श्रवण यन्त्रले तपाईंलाई फोन र भिडियो कलहरू सिधै स्ट्रिम गर्न अनुमति दिनेछ। यसले के भनिएको छ भनेर सुन्न सजिलो बनाउँछ।
- तपाईंले अब आफ्नो स्मार्ट उपकरणबाट संगीत, भिडियो वा अन्य अडियो सुन्न हेडफोन लगाउनु पर्दैन किनकी ध्वनि तपाईंको श्रवण यन्त्रमा स्ट्रिम गरिनेछ।


यदि तपाईंसँग उपयुक्त स्मार्ट उपकरण छ भने, कृपया आफ्नो श्रवण यन्त्रहरू यसमा जडान गर्न यस पुस्तिकामा दिइएका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।


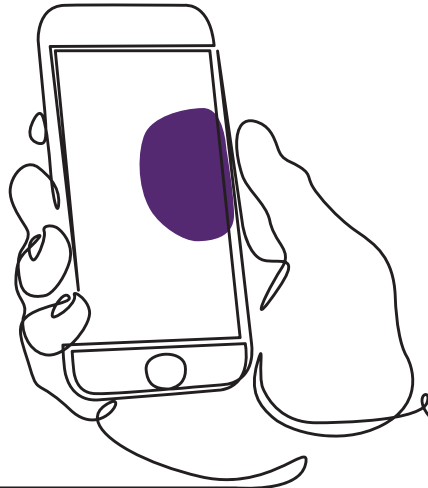


आफ्नो एप्पल® उपकरणसँग आफ्नो श्रवण यन्त्रहरू कसरी जोड्ने

कृपया यस विशिष्ट क्रममा यी निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।

1. आफ्नो श्रवण यन्त्रहरू बन्द गर्नुहोस्।
2. आफ्नो एप्पल उपकरणको 'सेटिङहरू' मेनुमा गएर ब्ल्यूटूथ सक्रिय गर्नुहोस्। तपाईंले ब्ल्यूटूथ सक्रिय गर्दा स्लाइडर हरियो हुन्छ।
3. मुख्य सेटिङहरू मेनुमा फर्कनुहोस् र त्यसपछि 'पहुँच योग्य' मा ट्याप गर्नुहोस्।
4. 'श्रवण यन्त्रहरू' मा तल स्क्रोल गर्नुहोस्।
5. यदि तपाईंको श्रवण यन्त्रहरू पहिले नै सक्रिय छन् भने, कृपया तिनीहरूलाई पुनः सुरु गर्नुहोस्। अन्यथा, कृपया आफ्नो श्रवण यन्त्रहरू सक्रिय गर्नुहोस्। यसले तपाईंको एप्पल उपकरणले तपाईंको श्रवण यन्त्रहरू पत्ता लगाउन सक्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नेछ।

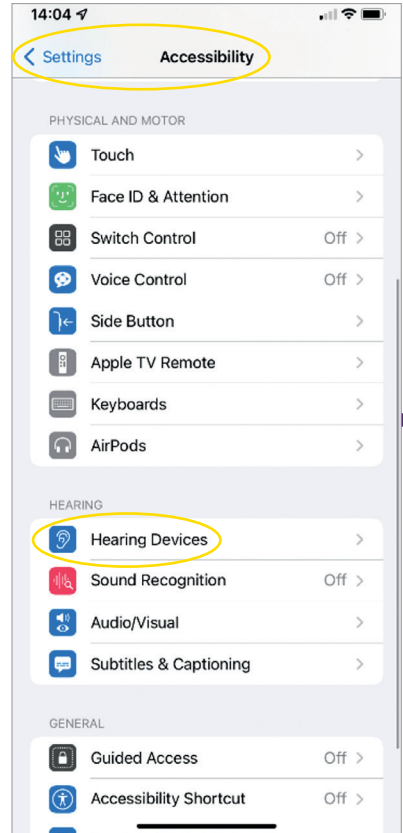

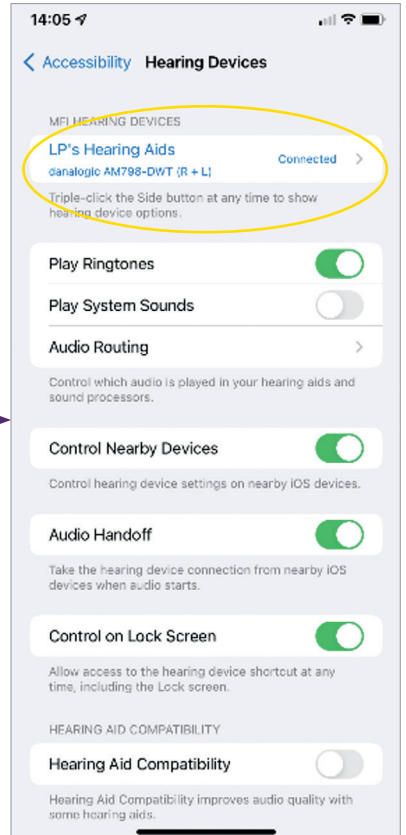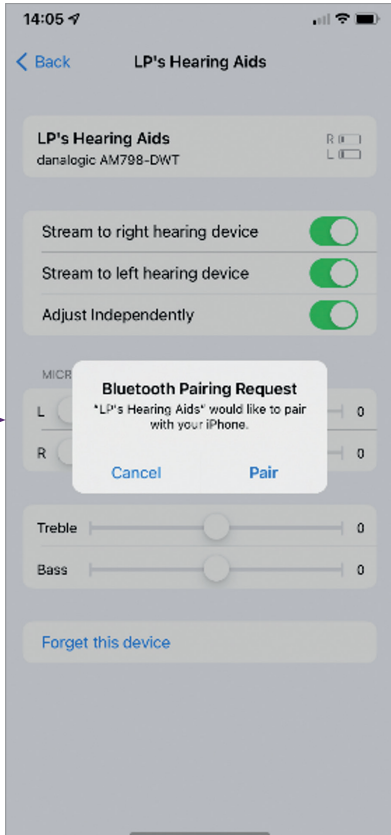


1. 'पेयर बनाउनुहोस्' मा ट्याप गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग दुई श्रवण यन्त्रहरू छन् भने, तपाईंले दुई पटक स्वीकार गर्नु पर्नेछ।
2. एप स्टोरमा जानुहोस् र 'बिमोर' खोज्नुहोस्।
3. बिमोर एप डाउनलोड गर्नुहोस्, यसलाई खोल्नुहोस् र 'सुरु गर्नुहोस्' मा ट्याप गर्नुहोस्।
4. एपमा जडान गर्न स्क्रिनमा दिइएका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। तपाईं अब चलाउन तयार हुनुहुन्छ।

नोट: यी चरणहरू हुन् र यो iOS 13 र नयाँमा कस्तो देखिन्छ

यदि तपाईंलाई आफ्नो एप्पल उपकरण पुनः जोडा बनाउन आवश्यक छ भने


यदि तपाईंको एउटा वा दुवै श्रवण यन्त्रहरू प्रतिस्थापन गरिएको छ भने, तपाईंले तिनिहरूलाई आफ्नो स्मार्ट उपकरणमा पुनः जोडा बनाउन आवश्यक छ।

1. सेटिङ मेनुमा गएर पुराना श्रवण यन्त्रहरू हटाएर सुरु गर्नुहोस्।
2. तल स्क्रोल गर्नुहोस् र 'पहुँच योग्य' चयन गर्नुहोस्।
3. 'श्रवण यन्त्रहरू' चयन गर्नुहोस्।
4. MFI श्रवण यन्त्रहरू' खण्ड अन्तर्गत स्क्रिनमा श्रवण यन्त्रहरू चयन गर्नुहोस् र 'यो यन्त्र बिर्सनुहोस्' मा ट्याप गर्नुहोस्।
5. आफ्नो नयाँ श्रवण यन्त्रहरू पुनः सुरु गर्नुहोस् र 'पेयर' थिच्नुहोस्। यदि तपाईंले दुई श्रवण यन्त्रहरू लगाएको छ भने तपाईंले दुई पटक 'पेयर' ट्याप गर्नु पर्नेछ।

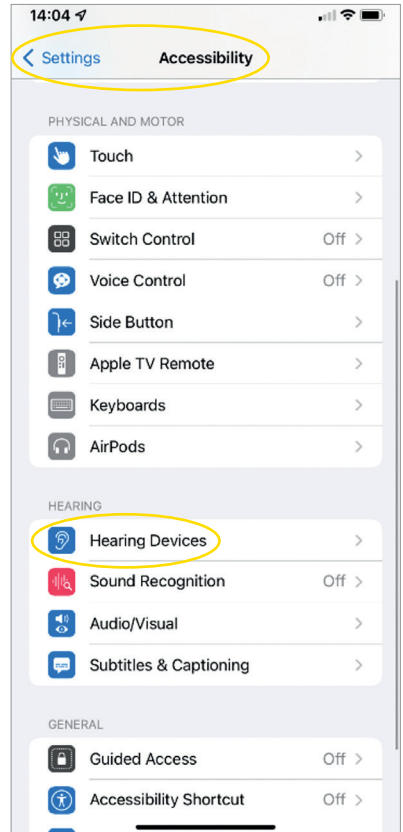

तपाईंको एन्ड्रोइड™ उपकरणसँग आफ्नो श्रवण यन्त्रहरू कसरी जोडा बनाउने

1. गुगल प्ले स्टोरमा जानुहोस्, 'बिमोर' खोज्नुहोस् र एप डाउनलोड गर्नुहोस्।
2. डाउनलोड गरि सके पछि, एप खोल्नुहोस् र 'सुरु गर्नुहोस्' ट्याप गर्नुहोस्।
3. एपमा जडान गर्न स्क्रिनमा दिइएका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। तपाईं अब चलाउन तयार हुनुहुन्छ।

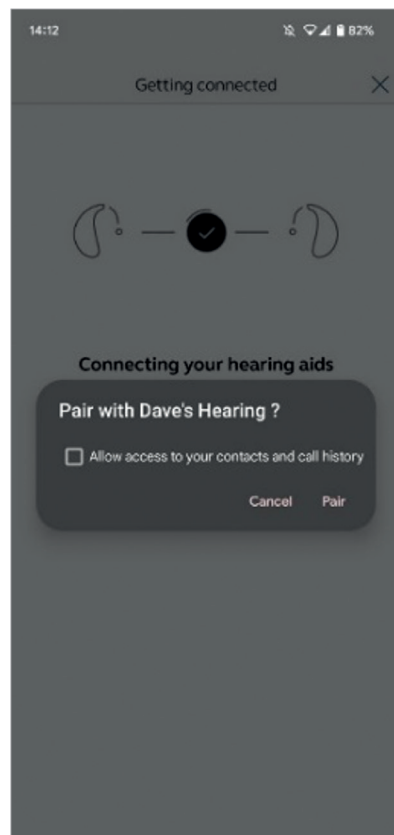

यदि तपाईंलाई आफ्नो एन्ड्रोइड उपकरण पुनः जोडा बनाउन आवश्यक छ भने

यदि तपाईंको एउटा वा दुवै श्रवण यन्त्रहरू प्रतिस्थापन गरिएको छ भने, तपाईंले तिनिहरूलाई आफ्नो स्मार्ट उपकरणमा पुनः जोडा बनाउन आवश्यक छ।

1. सेटिङ मेनु खोल्न स्क्रिनको माथिबाट तल स्वाइप गर्नुहोस्, त्यसपछि ब्लूटूथ आइकन 2 सेकेन्डको लागि होल्ड गर्नुहोस्।
2. श्रवण यन्त्रहरूको लागि सेटिङ आइकन 2 सेकेन्डको लागि होल्ड गर्नुहोस्।
3. 'बिर्सनुहोस्' चयन गर्नुहोस्।
4. बिमोर एप खोल्नुहोस्।
5. 'बिमोर मेनु' खोल्नुहोस् र 'नयाँ श्रवण यन्त्रहरू जोडा बनाउनुहोस्' चयन गर्नुहोस्। त्यसपछि जडान गर्न स्क्रिनमा दिइएका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। तपाईं अब चलाउन तयार हुनुहुन्छ।



danalogic GN

यदि तपाईंलाई कठिनाई भइरहेको छ भने,
कृपया थप मार्गदर्शनको लागि हाम्रो वेबसाइट
www.danalogic.co.uk हेर्नुहोस्।



श्रवण सहायता समर्थन, हेरचाह
निर्देशनहरू, भिडियोहरू कसरी
बनाउने र थप कुराहरूमा तत्काल
पहुँचको लागि मलाई स्वयान गर्नुहोस्।

© 2022 द GN रिसाउन्ड समूह, सबै अधिकार सुरक्षित। डेनालोजिक GN श्रवण A/S को ट्रेडमार्क हो।
एप्पल र एप्पल लोगो अमेरिका र अन्य देशहरूमा दर्ता भएका एप्पल इंकका ट्रेडमार्क हुन्। एप स्टोर
अमेरिका र अन्य देशहरूमा दर्ता भएका एप्पल इंकको सेवा चिन्ह हो। एन्ड्रोइड, गुगल प्ले र गुगल प्ले लोगो
गुगल एलएलसीका ट्रेडमार्क हुन्। ब्लुटूथ शब्द चिन्ह र लोगो ब्लुटूथ एसआईजी, इंकको स्वामित्वमा रहेका
दर्ता गरिएका ट्रेडमार्क हुन्।

नोटहरूः

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The paper itself is a clean, off-white color.

नोटहरूः

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

जीएनबाट डेनालोजिकले सम्पूर्ण बिरामी यात्रामा सकारात्मक नतिजाहरू ल्याउन कडा परिश्रम गर्छ, जसले NHS लाई वास्तवमै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा राम्रो हेरचाह प्रदान गर्न सक्षम बनाउँछ।

डेनालोजिक जीएन समूहको हिस्सा हो - विश्व-अग्रणी श्रवण उपकरणहरू देखि जबरा अफिस हेडसेट र खेलकुद हेडफोनहरू सम्म उत्कृष्ट ध्वनिको अग्रणी। 1889 मा स्थापित र 5,000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्दै। जीएनले जीवनलाई राम्रो बनाउँछ।

www.danalogic.co.uk



जीएन हियरिङ युके लिमिटेड
युनिट 13,
तालिसम्यान बिजनेस सेन्टर,
बिसेस्टर OX26 6HR
टेलिफोन: +44 1869 352 800
फ्याक्स: +44 1869 343 466
danalogicuk@gnhearing.com
www.danalogic.co.uk