

danalogic GN

डेनालोजिक एक्टियो

ब्लूटूथतपाईंको नh®श्रवण



तपाईंको नयाँ डेनालोजिक एक्टियो श्रवण यन्त्रहरूमा ब्लुटूथ क्षमता छ।

यो राम्रो खबर हो किनकि यो सुविधाले तपाईंलाई स्मार्ट उपकरण (कल, संगीत र अन्य अडियो) बाट ध्वनिहरू सिधै तपाईंको श्रवण यन्त्रहरू मार्फत स्ट्रिम गर्न अनुमति दिन्छ। यस सुविधा www.danalogic.co.uk/connectivity


डेनालोजिक एक्टियोमा चयन गरिएका एप्पल® उपकरणहरूसँग ह्यान्ड्स-फ्री कलिडको लागि अनुमति दिने क्षमता पनि छ। ह्यान्ड्स-फ्री कलिडले तपाईंलाई आफ्नो श्रवण यन्त्रहरू प्रयोग गरेर फोन कलहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छ र तपाईंको श्रवण यन्त्रहरूले तपाईंको आवाज उठाउन माइक्रोफोनको रूपमा काम गर्नेछ, साथै तपाईंको फोनबाट ध्वनि सिधै तपाईंको श्रवण यन्त्रहरूमा स्ट्रिम गर्नेछ। यस सुविधा www.danalogic.co.uk/connectivity

ब्लूटूथ श्रवण यन्त्रका फाइदाहरू

- श्रवण यन्त्र लगाएर फोन कल गर्नु गाह्रो हुन सक्छ। तपाईंको नयाँ श्रवण यन्त्रले तपाईंलाई फोन र भिडियो कलहरू दुवै सिधै स्ट्रिम गर्न अनुमति दिनेछ। यसले के भनिएको छ सुन्न सजिलो बनाउँछ।
- तपाईंले अब आफ्नो स्मार्ट उपकरणबाट संगीत, भिडियो वा अन्य अडियो सुन्न हेडफोन लगाउनु पर्दैन किनकि ध्वनि तपाईंको श्रवण यन्त्रमा स्ट्रिम गरिनेछ।


ब्लूटूथ स्ट्रिमिङको लागि तपाईंको श्रवण यन्त्रहरू जडान गर्दै


यदि तपाईंसँग उपयुक्त स्मार्ट उपकरण छ भने, कृपया आफ्नो श्रवण यन्त्रहरू यसमा जडान गर्न यो पुस्तिकामा दिइएका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।

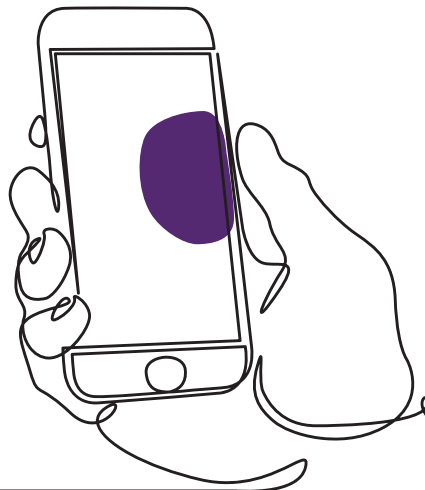

तपाईंको एप्पल उपकरणसँग आफ्नो श्रवण यन्त्रहरू कसरी जोड्ने

1. तपाईंको श्रवण यन्त्रहरू बन्द गर्नुहोस्।
2. आफ्नो एप्पल उपकरणको 'सेटिङ्हरू' मेनुमा गएर ब्ल्युटूथ अन गर्नुहोस्। ब्ल्युटूथ सक्रिय गर्दा स्लाइडर हरियो हुन्छ।
3. मुख्य सेटिङ मेनुमा फर्कनुहोस् र त्यसपछि 'पहुँच योग्य' मा ट्याप गर्नुहोस्।
4. 'श्रवण उपकरणहरू' मा तल स्क्रोल गर्नुहोस्।
5. यदि तपाईंको श्रवण उपकरणहरू पहिले नै सक्रिय छन् भने, कृपया तिनीहरूलाई पुनः सुरु गर्नुहोस्। अन्यथा, कृपया आफ्नो श्रवण उपकरणहरू सक्रिय गर्नुहोस्। यसले तपाईंको एप्पल उपकरणले तपाईंको श्रवण उपकरणहरू पत्ता लगाउन सक्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नेछ।

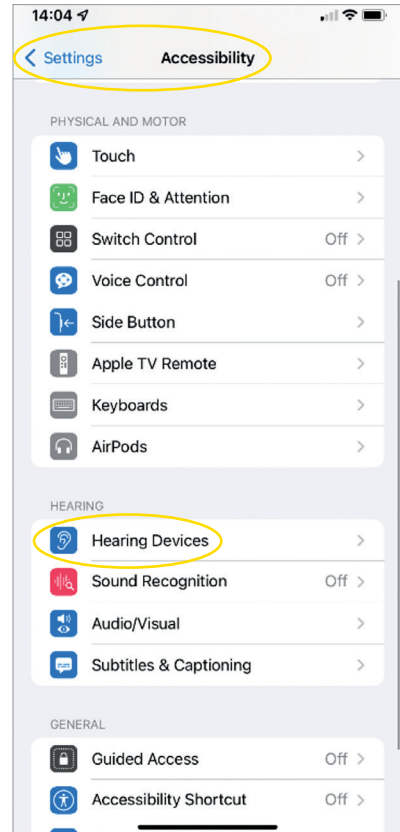

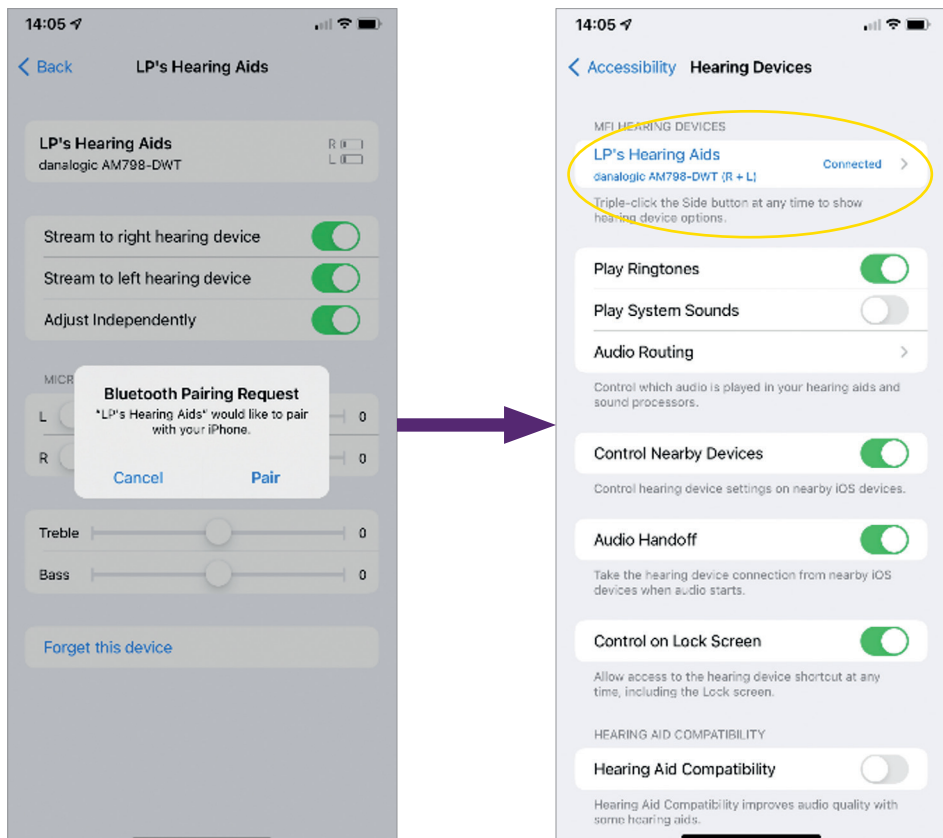


1. 'पेयर' मा ट्याप गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग दुई श्रवण उपकरणहरू छन् भने, तपाईंले दुई पटक स्वीकार गर्नु पर्नेछ।
2. एप स्टोरमा जानुहोस् र आफ्नो श्रवण उपकरणहरूको लागि 'बिमोर' खोज्नुहोस्।
3. बिमोर एप डाउनलोड गर्नुहोस्। यसलाई खोल्नुहोस् र 'सुरु गर्नुहोस्' मा ट्याप गर्नुहोस्।
4. एपमा जडान गर्न स्क्रिनमा दिइएका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। तपाईं अब चलाउन तयार हुनुहुन्छ।

नोट: यी चरणहरू हुन् र iOS 13 र नयाँमा यो कस्तो देखिन्छ

यदि तपाईंलाई आफ्नो एप्पल उपकरण पुनः पेयर गर्न आवश्यक छ भने

यदि तपाईंको एक वा दुवै श्रवण यन्त्रहरू प्रतिस्थापन गरिएको छ भने, तपाईंले तिनीहरूलाई आफ्नो स्मार्ट उपकरणमा पुनः पेयर बनाउन आवश्यक छ।


1. सेटिङ मेनुमा गएर पुरानो श्रवण यन्त्रहरू हटाएर सुरु गर्नुहोस्।
2. तल स्क्रोल गर्नुहोस् र 'पहुँच योग्य' चयन गर्नुहोस्।
3. 'श्रवण यन्त्रहरू' चयन गर्नुहोस्।
4. 'MFI श्रवण यन्त्रहरू' खण्ड अन्तर्गत स्क्रिनमा श्रवण यन्त्रहरू चयन गर्नुहोस् र 'यो यन्त्र बिर्सनुहोस्' मा ट्याप गर्नुहोस्।
5. आफ्नो नयाँ श्रवण यन्त्रहरू पुनः सुरु गर्नुहोस् र 'पेयर' थिच्नुहोस्। यदि तपाईंले दुई श्रवण यन्त्रहरू लगाएको हुनुहुन्छ भने तपाईंले 'पेयर' दुई पटक ट्याप गर्नुपर्नेछ।

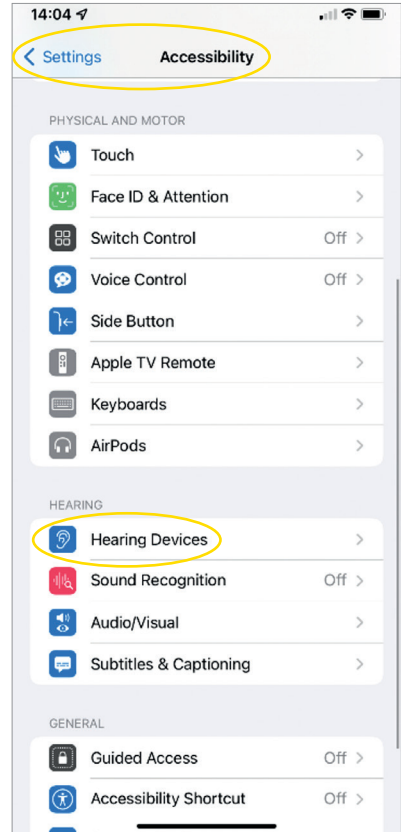

डेनालोजिक एक्टियो मार्फत आइफोन® र आइप्याड® को लागि ह्यान्ड्स-फ्री कलहरूको आनन्द कसरी लिने


कृपया हाम्रो वेबसाइट go.gn.com/app-support जाँच गरेर आफ्नो उपकरण उपयुक्त छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।

प्रकार्य	कसरी
कलको जवाफ दिने	आईफोन/आईप्याडमा जवाफ दिन आफ्नो श्रवण सहायता बटनमा छोटो प्रेस वा स्लाइड प्रयोग गर्नुहोस्
कल अन्त्य गर्नुहोस्	कल अन्त्य गर्न आफ्नो श्रवण सहायता बटन केही सेकेन्डको लागि थिच्नुहोस् र होल्ड गर्नुहोस्। वैकल्पिक रूपमा, आफ्नो स्क्रिनमा रातो बटन ट्याप गरेर काट्नुहोस्
दोस्रो आगमन कलहरू	यदि तपाईं कलमा हुनुहुन्छ र तपाईंको दोस्रो कल आगमन भइ रहेको छ भने, आफ्नो श्रवण सहायता बटनमा लामो प्रेस प्रयोग गरेर यसलाई अस्वीकार गर्नुहोस् वा आईफोन वा आईप्याड स्क्रिनमा 'अस्वीकार गर्नुहोस्' ट्याप गर्नुहोस्
भोल्युम परिवर्तन गर्नुहोस्	आईफोन वा आईप्याडमा माथि र तल भोल्युम बटनहरू प्रयोग गर्नुहोस्
आईओएस श्रवण सहायता सेटिङहरूमा ह्यान्ड्स-फ्री कलहरू बन्द गर्नुहोस्	आईओएस श्रवण सहायता सेटिङहरू पहुँच गर्न आईफोन पुश बटनमा तीन पटक क्लिक गर्नुहोस् (तपाईं नियन्त्रण केन्द्र मार्फत पनि पहुँच प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ)। 'इनपुट विकल्पहरू' चयन गर्नुहोस् त्यसपछि 'बन्द' गर्नुहोस्

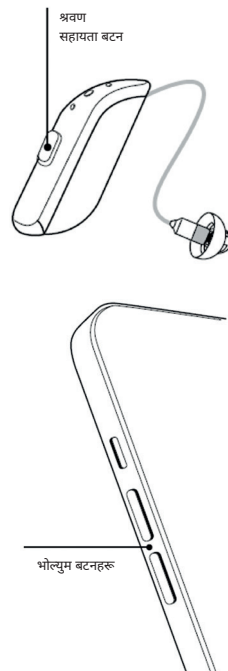

तपाईंको श्रवण यन्त्रहरूलाई तपाईंको एन्ड्रोइड™ उपकरणसँग कसरी जोड्ने

1. गुगल प्ले स्टोरमा जानुहोस्,बिमोर खोज्नुहोस् र एप डाउनलोड गर्नुहोस्।
2. डाउनलोड भए पछि, एप खोल्नुहोस् र 'सुरु गर्नुहोस्' मा ट्याप गर्नुहोस्।
3. एपमा जडान गर्न स्क्रिनमा दिइएका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। तपाईं अब चलाउन तयार हुनुहुन्छ।

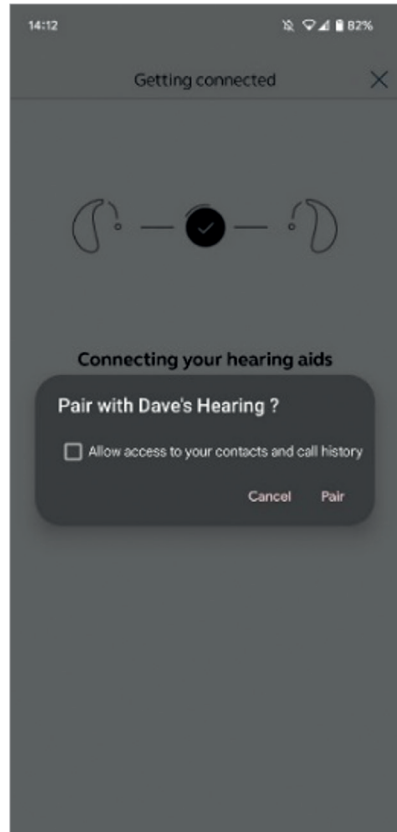

यदि तपाईंलाई आफ्नो एन्ड्रोइड उपकरण पुनः पेयर बनाउन आवश्यक छ भने

यदि तपाईंको एक वा दुवै श्रवण यन्त्रहरू प्रतिस्थापन गरिएको छ भने, तपाईंले तिनीहरूलाई आफ्नो स्मार्ट उपकरणमा पुनः पेयर बनाउन आवश्यक पर्दछ।

1. 'सेटिङ्स' मेनु खोल्न स्क्रिनको माथिबाट तल स्वाइप गर्नुहोस्, त्यसपछि ब्ल्यूटूथ आइकन 2 सेकेन्डसम्म होल्ड गर्नुहोस्।
2. श्रवण यन्त्रहरूको लागि सेटिङ्स आइकन 2 सेकेन्डसम्म होल्ड गर्नुहोस्।
3. 'बिर्सनुहोस्' चयन गर्नुहोस्।
4. बिमोर एप खोल्नुहोस्।
5. 'बिमोर मेनु' खोल्नुहोस् र 'नयाँ श्रवण यन्त्रहरू पेयर बनाउनुहोस्' चयन गर्नुहोस्। त्यसपछि जडान गर्न स्क्रिनमा दिइएका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। तपाईं अब चलाउन तयार हुनुहुन्छ।



danalogic GN

यदि तपाईंलाई कठिनाई भइरहेको छ भने, कृपया
थप मार्गदर्शनको लागि हाम्रो वेबसाइट
www.danalogic.co.uk हेर्नुहोस्।



श्रवण सहायता समर्थन, हेरचाह
निर्देशनहरू, भिडियोहरू कसरी
बनाउने र थप कुराहरूमा तत्काल
पहुँचको लागि मलाई स्वयान गर्नुहोस्।

© 2022 GN ReSound समूह, सबै अधिकार सुरक्षित। डेनालोजिक GN श्रवण A/S को ट्रेडमार्क हो।
एप्पल र एप्पल लोगो अमेरिका र अन्य देशहरूमा दर्ता भएका एप्पल इंकका ट्रेडमार्क हुन्। एप्पल स्टोर
अमेरिका र अन्य देशहरूमा दर्ता भएका एप्पल इंकको सेवा चिन्ह हो। एन्ड्रोइड, गुगल प्ले र गुगल प्ले लोगो
गुगल LLC का ट्रेडमार्क हुन्। ब्लूटूथ शब्द चिन्ह र लोगोहरू ब्लूटूथ SIG, इंकको स्वामित्वमा रहेका दर्ता
गरिएका ट्रेडमार्कहरू हुन्।



danalogic GN

GN बाट डानालोजिक ले सम्पूर्ण बिरामी यात्रामा सकारात्मक नतिजाहरू ल्याउन कडा परिश्रम गर्दछ, NHS लाई वास्तवमै महत्वपूर्ण ठाउँमा राम्रो हेरचाह प्रदान गर्न सक्षम बनाउँछ।

डेनालोजिक GN समूहको एक हिस्सा हो - विश्व-अग्रणी श्रवण उपकरणहरूदेखि जाब्रा अफिस हेडसेटहरू र खेलकुद हेडफोनहरू सम्म उत्कृष्ट ध्वनिको अग्रणी। 1869 मा स्थापित र 5,000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई रोजगारी दिँदै। GN ले जीवनलाई राम्रो बनाउँछ।

www.danalogic.co.uk



GN Hearing UK Ltd.
युनिट 13,
तालिसम्यान बिजनेस सेन्टर,
बिसेस्टर OX26 6HR
टेलिफोन: +44 1869 352 800
फ्याक्स: +44 1869 343 466
danalogicuk@gnhearing.com
www.danalogic.co.uk