

danalogic GN

danalogic Actio

Вашият нов Bluetooth® слухов апарат



Новият Ви слухов апарат danalogic Actio има Bluetooth възможности.

Това е чудесна новина, тъй като тази функция Ви позволява да осъществявате аудио стрийминг от смарт устройство (обаждания, музика и друго аудио) директно през Вашия слуховия апарат.

За списък на смарт устройства, съвместими с тази функция, вижте списъка тук **www.danalogic.co.uk/connectivity**


Danalogic Actio позволява също и да провеждате разговори със свободни ръце с избрани Apple® устройства. Разговорите със свободни ръце ви позволяват да отговаряте на телефонни обаждания, като използвате слуховия си апарат, а слуховият Ви апарат играе ролята на микрофон, който да улавя гласа Ви, както и да предава звука от телефона чрез директен стрийминг на слуховия апарат. За списък на устройства Apple, съвместими с тази функция, посетете следния уебсайт **www.danalogic.co.uk/connectivity**

Преимущества на слуховите апарати с Bluetooth

- Телефонните разговори могат да бъдат трудни, когато носите слухов апарат. Новият Ви слухов апарат ще Ви позволи да осъществявате директно стрийминг на телефонни разговори и видео повиквания. Така ще чувате по-лесно какво се говори.
- Вече няма да се налага да носите слушалки, за да слушате музика, звука на видеоклипове или други аудио записи от смарт устройството си, тъй като звукът ще се предава чрез стрийминг директно на слуховия Ви апарат.


Свързване на слуховия апарат за Bluetooth стрийминг


Ако имате съвместимо смарт устройство, следвайте указанията в тази брошура, за да свържете слуховия си апарат с него.

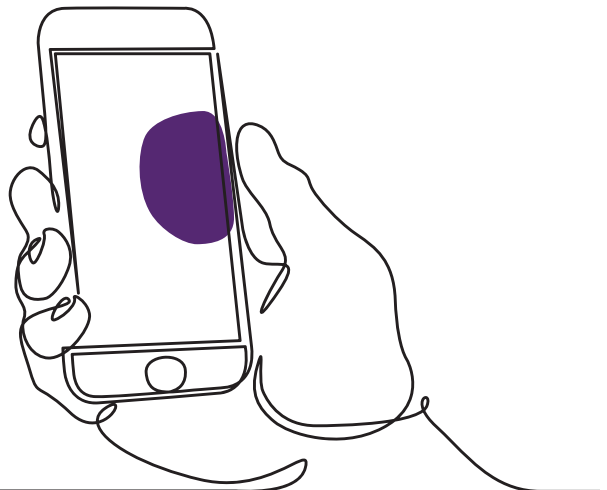

Как да свържете слуховия си апарат в двойка с Вашето устройство Apple

1. Изключете слуховия апарат.
2. Включете Bluetooth от менюто „Settings“ (Настройки) на Вашето устройство Apple. След като активирате Bluetooth, плъзгачът става зелен.
3. Върнете се в главното меню „Settings“ (Настройки) и докоснете „Accessibility“ (Достъпност).
4. Превъртете надолу до „Hearing Devices“ (Слухови устройства).
5. Рестартирайте слуховия си апарат, ако вече е включен. В противен случай включете слуховия апарат. Това ще гарантира, че Вашето устройство Apple може да разпознае слуховия апарат.

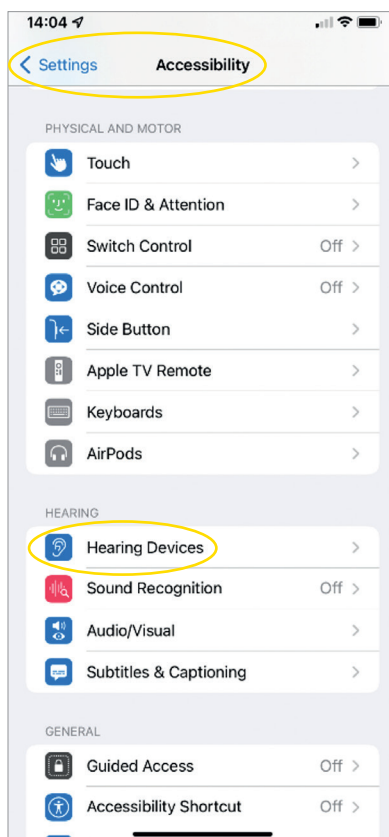

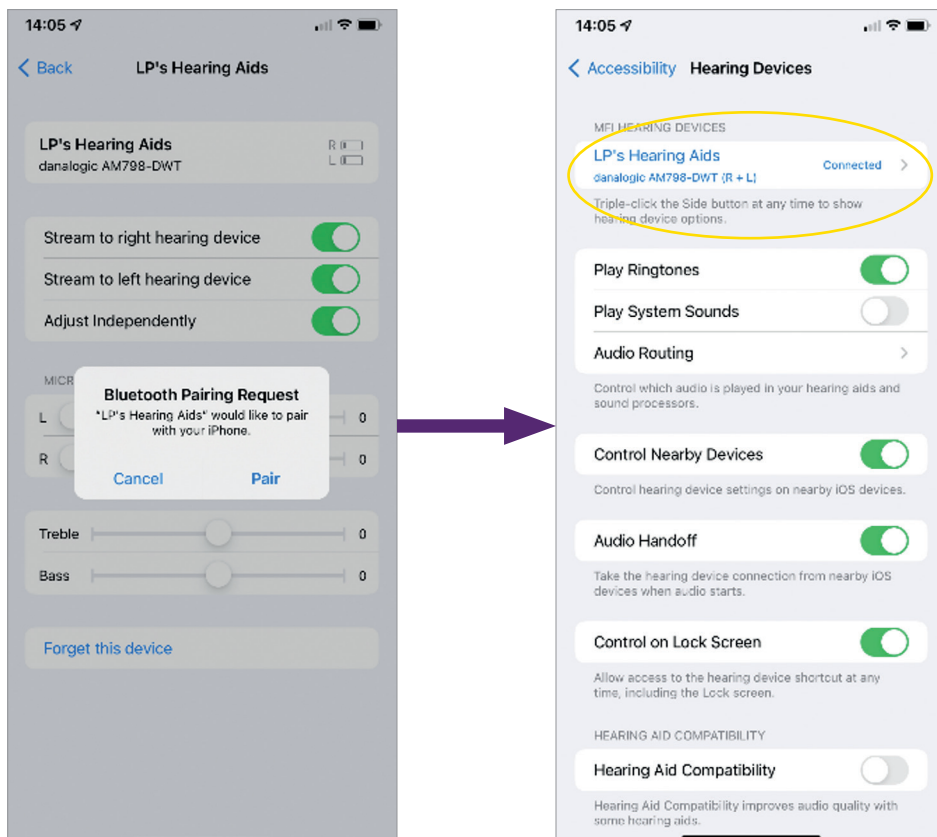


6. Докоснете „Pair“ (Сдвояване). Ако имате два слухови апарата, ще трябва да потвърдите два пъти.
7. Отворете App Store и потърсете „BeMore“ за Вашия слухов апарат.
8. Изтеглете приложението BeMore. Отворете го и докоснете „Get Started“ (Първи стъпки).
9. Следвайте инструкциите от екрана, за да се свържете с приложението. Вече сте готови да започнете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Така изглеждат стъпките и екраните в iOS 13 и по-нови

Ако трябва да свържете отново устройството си Apple в двойка

Ако сте сменили единия или и двата си слухови апарата, ще трябва да ги свържете отново в двойка с Вашето смарт устройство.


1. Като начало премахнете старите си слухови апарати от менюто „Settings“ (Настройки).
2. Превъртете надолу и изберете „Accessibility“ (Достъпност).
3. Изберете „Hearing Devices“ (Слухови устройства).
4. Изберете слуховите апарати на екрана от раздел „MFI Hearing Devices“ (MFI слухови устройства) и докоснете „Forget this device“ (Забрави това устройство).
5. Рестартирайте новите си слухови апарати и натиснете „Pair“ (Сдвояване). Ако носите два слухови апарата, ще трябва да натиснете „Pair“ (Сдвояване) два пъти.

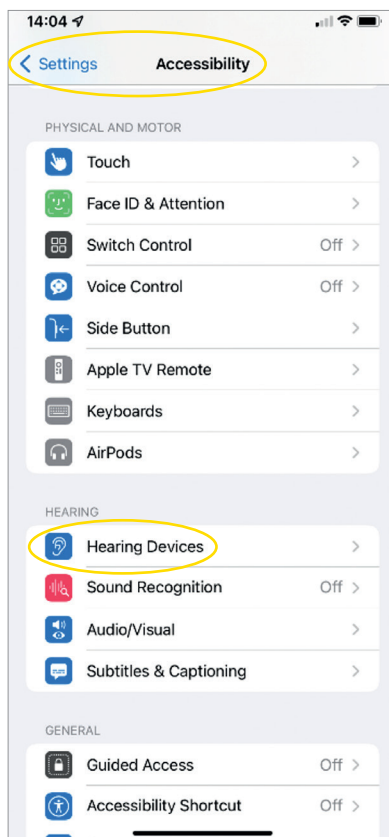

Как да се наслаждавате на разговори със свободни ръце за iPhone® и iPad® с Danalogic Actio

Уверете се, че устройството Ви е съвместимо, като проверите на нашия уебсайт go.gn.com/app-support


Функция	Как се използва
Отговаряне на повикване	Натиснете за кратко бутона на слуховия си апарат или плъзнете, за да отговорите на повикване на iPhone/iPad
Край на обаждане	Натиснете и задръжте бутона на слуховия си апарат няколко секунди, за да приключите обаждането. Като алтернатива, приключете разговора, като докоснете червения бутон на екрана
Второ входящо повикване	Ако провеждате разговор и получите второ входящо повикване, откажете повикването, като натиснете и задръжте бутона на слуховия си апарат или като докоснете „Decline“ (Отказ) на екрана на iPhone или iPad
Промяна на силата на звука	Използвайте бутоните за увеличаване и намаляване на звука на iPhone или iPad
Изключване на разговорите със свободни ръце от настройките за слуховия апарат в iOS	Кликнете три пъти върху бутона на iPhone, за да получите достъп до настройките на слуховия апарат в iOS (можете да получите достъп и чрез „Control Centre“ (Центъра за управление)). Изберете „Input Options“ (Опции за въвеждане) и после „Off“ (Изключване)

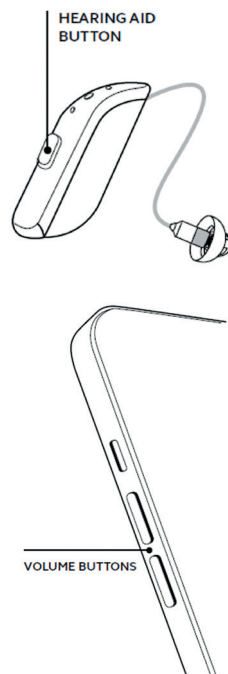

Сканирайте QR кода за достъп до учебния видеоклип или посетете: danalogic.co.uk/patient-portal

Как да свържете слуховия си апарат в двойка с Вашето Android™ устройство

1. Отворете Google Play Store, намерете VeMore и изтеглете приложението.
2. След като го изтеглите, отворете приложението и докоснете „Get Started“ (Първи стъпки).
3. Следвайте инструкциите от екрана, за да се свържете с приложението. Вече сте готови да започнете.

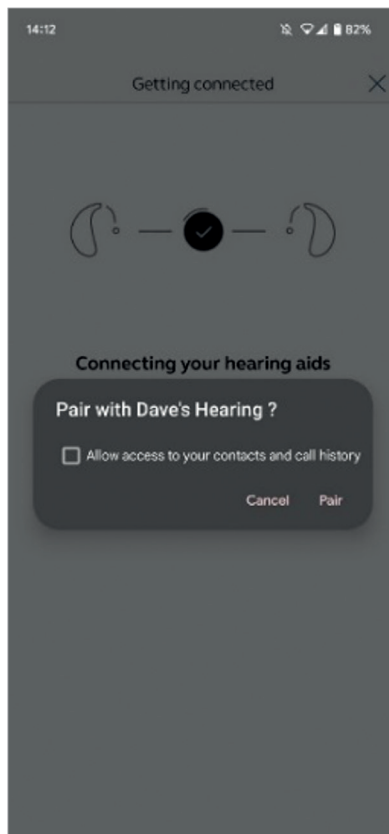

Ако трябва да свържете отново Android устройството си в двойка

Ако сте сменили единия или и двата си слухови апарата, ще трябва да ги свържете отново в двойка с Вашето смарт устройство.

1. Плъзнете надолу от горния край на екрана, за да отворите менюто „Settings“ (Настройки) и след това натиснете иконата на Bluetooth за 2 секунди.
2. Натиснете иконата „Слухови устройства“ от Settings (Настройки) за 2 секунди.
3. Изберете „Forget“ (Забрави).
4. Отворете приложението VeMore.
5. Отворете менюто „VeMore Menu“ и изберете „Pair new hearing aids“ (Сдвояване на нови слухови апарати). След това изпълнете указанията от екрана, за да осъществите свързването. Вече сте готови да започнете.



danalogic GN

Ако срещнете затруднения, проверете на нашия уебсайт **www.danalogic.co.uk** за допълнителни указания или се свържете с Вашия аудиолог.



Сканирайте ме за незабавен достъп до поддръжка на слухови апарати, инструкции за грижа, учебни видеоклипове и др.

© 2022 The GN ReSound Group, всички права запазени. Danalogic е търговска марка на GN Hearing A/S. Apple и логото на Apple са търговски марки на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни. App Store е марка за услуги на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни. Android, Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC. Словната марка и логата на Bluetooth са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc.



danalogic GN

Danalogic от GN работи още по-усилено за постигане на положителни резултати по време на цялото пътуване на пациента, осигурявайки на NHS възможност да предоставя по-добри грижи там, където те наистина са от значение.

Danalogic е част от GN Group – лидер в областта на осигуряване на великолепен звук от водещите в света слухови апарати до офисните и спортните слушалки Jabra. Основана е през 1869 г. и за нея работят над 5000 души. GN прави живота да звучи по-добре.

www.danalogic.co.uk



GN Hearing UK Ltd.
Unit 13,
Talisman Business Centre,
Bicester OX26 6HR
Тел.: +44 1869 352 800
Факс: +44 1869 343 466
danalogicuk@gnhearing.com
www.danalogic.co.uk