


danalogic GN

danalogic Ambio Smart

آپ کا نیا
Bluetooth®
آلہ سماعت

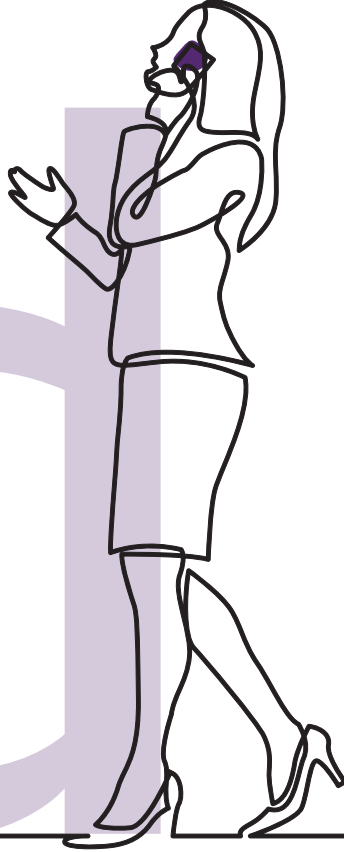

GN Making Life Sound Better

آپ کا danalogic Ambio Smart کا نیا آلہ سماعت بلوٹوتھ کی خصوصیت کا حامل ہے۔

یہ ایک اچھی خبر ہے کیونکہ اس نئی خصوصیت کی مدد سے آپ متعدد فوائد حاصل کریں گے بشمول آپ اپنے فون (کالز، میوزک، اور آڈیو) کی آوازیں براہ راست آلہ سماعت سے سن سکیں گے۔

یہ خصوصیت یہاں درج کردہ سمارٹ ڈیوائسز میں دستیاب ہیں:

www.danalogic.co.uk/connectivity


بلوٹوتھ آلہ سماعت کے فوائد

- کان میں آلہ سماعت لگائے ہوئے فون کال سننا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کا نیا آلہ سماعت آپ کو فون اور ویڈیو کال دونوں براہ راست سننے کی اجازت دیتا ہے۔ جو بات کہی جا رہی ہے یہ اس کو سننا آسان بنا دیتا ہے۔
- اب آپ کو اپنی سمارٹ ڈیوائس سے میوزک، ویڈیوز یا دیگر آڈیو سننے کے لیے ہیڈ فونز کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آواز براہ راست آپ کے آلہ سماعت کے ذریعے پہنچائی جائے گی۔




بلوٹوتھ اسٹریمنگ کے لیے اپنے آلہ سماعت کو منسلک کرنا

اگر آپ کے پاس موافق سمارٹ ڈیوائس ہے، تو براہ کرم اس سے آلہ سماعت کو منسلک کرنے کے لیے اس کتابچے میں موجود ہدایات پر عمل کریں۔

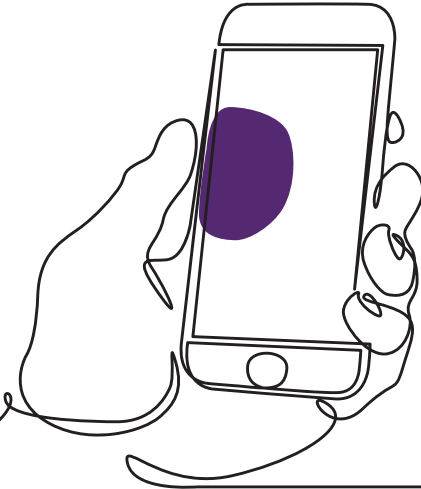



اپنی Apple® ڈیوائس کے ساتھ اپنا آلہ سماعت کی جوڑ کاری کس طرح کریں

براہ کرم اس مخصوص ترتیب میں ان ہدایات کی پیروی کریں۔

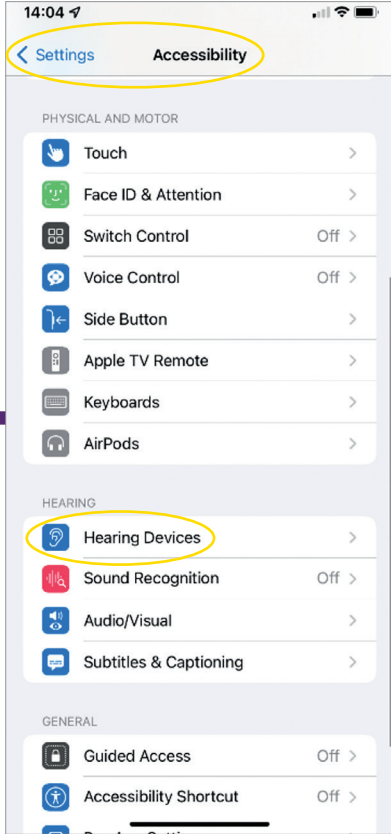

1. اپنا آلہ سماعت بند کریں۔
2. اپنی Apple ڈیوائس کی 'ترتیبات' کی فہرست میں جا کر بلوٹوتھ آن کریں۔ جب آپ بلوٹوتھ فعال کریں گے تو سلائڈر سبز ہو جائے گا۔
3. ترتیبات کی مرکزی فہرست میں واپس جائیں اور 'رسانی پذیری' پر ٹیپ کریں۔
4. نیچے اسکرول کر کے 'سماعتی ڈیوائسز' پر جائیں۔
5. اگر آپ کا آلہ سماعت پہلے سے آن ہے، تو براہ کرم اسے ری سٹارٹ کریں۔ بصورت دیگر، براہ کرم اپنا آلہ سماعت آن کریں۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ کی Apple ڈیوائس آپ کے آلہ سماعت کا پتہ لگا رہی ہے۔



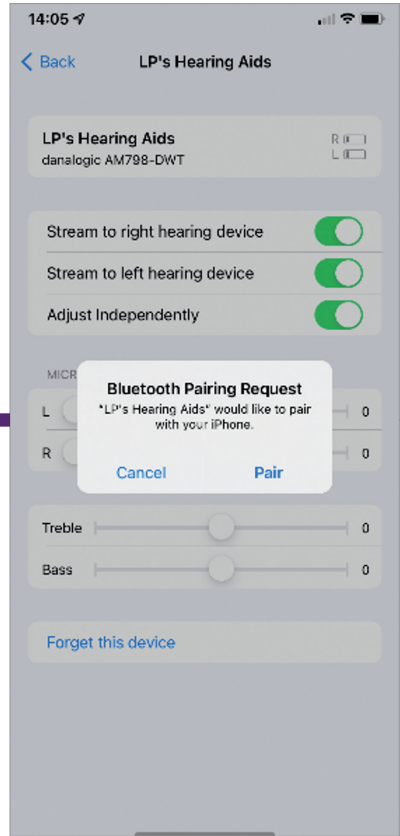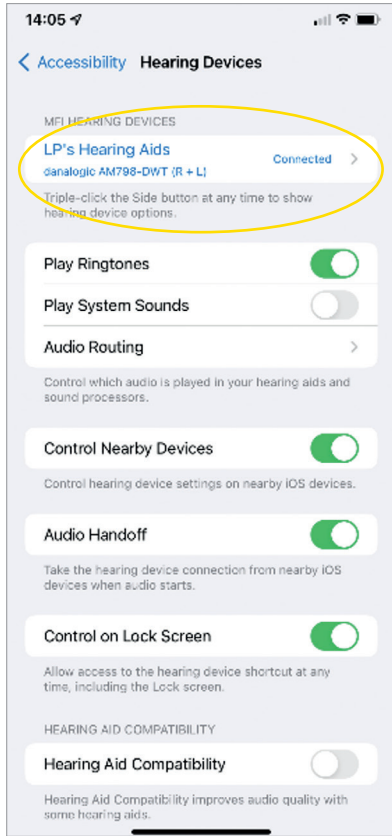

6. 'جوڑ کاری' پر کلک کریں۔ اگر آپ کے دو آلہ سماعت ہیں، تو آپ کو دو دفعہ قبول کرنے کی ضرورت ہو گی۔
7. App Store میں جائیں اور 'BeMore' تلاش کریں۔
8. BeMore ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اسے کھولیں اور 'شروع کریں' پر ٹیپ کریں۔
9. ایپ سے منسلک ہونے کے لیے اسکرین پر دی گئی ہدایات کی پیروی کریں۔ اب آپ اس عمل کے لیے تیار ہیں۔

نوٹ فرمائیں: یہ مراحل ہیں اور یہ iOS 13 اور نئے میں کیسے کام کرتے ہیں

اگر آپ کو اپنی Apple ڈیوائس سے دوبارہ جوڑ کاری درکار ہے

اگر آپ کا ایک یا دونوں آلہ سماعت تبدیل ہو گئے ہیں، تو آپ کو اپنی سمارٹ ڈیوائس سے دوبارہ جوڑ کاری کرنے کی ضرورت ہو گی۔


1. ترتیبات کی فہرست میں جا کر پرانے آلہ سماعت کو ہٹانے سے شروع کریں۔

2. نیچے اسکرول کریں اور 'رسانی پذیری' منتخب کریں۔

3. 'سماعتی ڈیوائسز' منتخب کریں۔

4. اسکرین پر 'MFI سماعتی ڈیوائسز' سیکشن کے تحت آلہ سماعت منتخب کریں اور 'اس ڈیوائس کو بھول جائیں' پر ٹیپ کریں۔


5. اپنا نیا آلہ سماعت ری سٹارٹ کریں اور 'جوڑ کاری' دبائیں۔ دو آلہ سماعت استعمال کرنے کی صورت میں آپ کو 'جوڑ کاری' پر دو دفعہ ٹیپ کرنا ہو گا۔

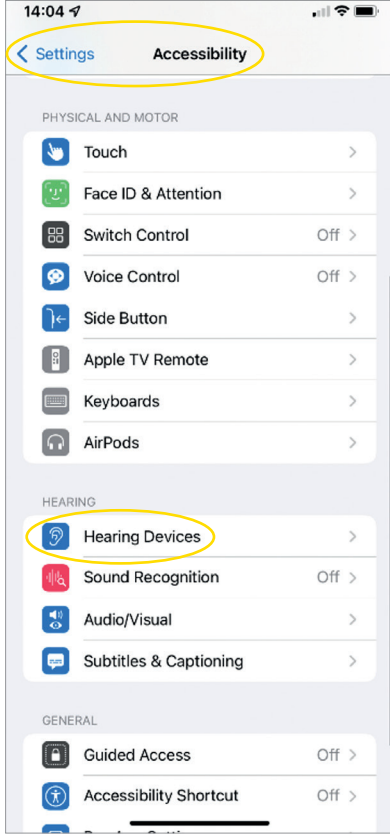

اپنی Android™ ڈیوائس کے ساتھ اپنے آلہ سماعت کی جوڑ کاری کس طریقے سے کریں



1. Google Play Store پر جائیں، 'BeMore' تلاش کریں اور ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔
2. ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ ہو جانے کے بعد، ایپ کھولیں اور شروع کریں! پر ٹیپ کریں۔
3. ایپ سے منسلک ہونے کے لیے اسکرین پر دی گئی ہدایات کی پیروی کریں۔ اب آپ اس عمل کے لیے تیار ہیں۔

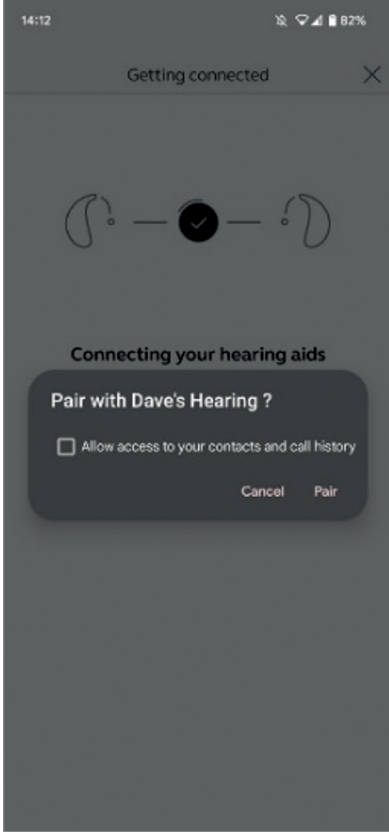

اگر آپ کو اپنی Android ڈیوائس سے دوبارہ جوڑ کاری درکار ہے

اگر آپ کا ایک یا دونوں آلہ سماعت تبدیل ہو گئے ہیں، تو آپ کو اپنی سمارٹ ڈیوائس سے دوبارہ جوڑ کاری کرنے کی ضرورت ہو گی۔

1. ترتیبات کی فہرست کھولنے کے لیے اسکرین اوپر سے نیچے کی طرف سوائپ کریں، پھر بلوٹوتھ آئیکن کو 2 سکینڈ کے لیے دبا کر رکھیں۔
2. آلہ سماعت کے لیے ترتیبات کے آئیکن کو 2 سکینڈز کے لیے دبائے رکھیں۔
3. 'بھول جائیں' منتخب کریں۔
4. BeMore ایپ کھولیں۔
5. 'BeMore فہرست' کھولیں اور 'نئی ڈیوائس سے جوڑ کاری' منتخب کریں۔ پھر منسلک ہونے کے لیے اسکرین پر نمودار ہونے والی ہدایات کی پیروی کریں۔ اب آپ اس عمل کے لیے تیار ہیں۔



danalogic GN

اگر آپ کو مشکلات کا سامنا ہے، تو مزید رہنمائی کے لیے براہ کرم ہماری ویب سائٹ danalogic.co.uk/patient-portal چیک کریں یا اپنے آڈیولوجسٹ سے رابطہ کریں۔



آلہ سماعت سے متعلق معاونت، نگہداشتی
بدایات، طریقہ کار سے متعلق ویڈیوز اور
مزید چیزوں تک فوری رسائی کے لیے،
مجھے اسکین کریں۔



© 2022 GN ReSound گرپ، جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ Danalogic GN Hearing A/S کا ٹریڈ مارک ہے۔ Apple اور Apple لوگو Apple انکارپوریشن کے ٹریڈ مارکس ہیں، جو امریکہ اور دیگر ممالک میں رجسٹرڈ ہیں۔ Apple App Store انکارپوریشن کا سروس مارک ہے، جو امریکہ اور دیگر ممالک میں رجسٹرڈ ہے۔ Google Play، Google Play اور Android، Google Play کا لوگو Google LLC کے ٹریڈ مارکس ہیں۔ Bluetooth اور لوگو Bluetooth SIG انکارپوریشن کے رجسٹرڈ ٹریڈ مارکس ہیں۔

danalogic GN

GN کی جانب سے Danalogic مریض کی تندرستی کے مکمل سفر میں مثبت نتائج لا رہا ہے، جس سے NHS کو وہاں بہترین نگہداشت کی فراہمی میں مدد مل رہی ہے جہاں اس کی واقعی ضرورت ہے۔

Danalogic GN گروپ کا حصہ ہے – جو کہ دنیا کی معروف سماعتی ڈیوائسز سے لے کر Jabra آفس کے ہیڈسیٹس اور اسپورٹس ہیڈ فونز تک بہترین آواز کا علمبردار ہے۔ 1869 میں قائم کردہ اور 5,000 سے زائد افراد کا وسیلہ روزگار ہے۔ GN آوازوں کو بہتر بناتا ہے۔

www.danalogic.co.uk



GN Hearing UK Ltd.

Unit 13,

Talisman Business Centre,

Bicester OX26 6HR

ٹیلی فون: +44 1869 352 800

فیکس: +44 1869 343 466

danalogicuk@gnhearing.com

www.danalogic.co.uk