

danalogic GN

danalogic Extend

Вашите нови
слухови апарати
с Bluetooth®
Low Energy
Audio



Вашите нови слухови апарати danalogic Extend са нашата първа гама за NHS, която включва чисто новия протокол Bluetooth® Low Energy Audio

Bluetooth LE Audio е разработен чрез сътрудничество между индустрията за потребителска електроника и производителите на слухови апарати. Bluetooth LE Audio е оптимизиран за ниска консумация на енергия, високо качество на звука и много ниска латентност. С Bluetooth LE Audio ще може да се установят директни връзки от телевизора, лаптопа или други устройства, съвместими с Bluetooth 5.3, към слуховите апарати. Този нов протокол е вграден по подразбиране в danalogic Extend и може да се свърже с излъчвани от Auracast потоци. Това прави тези слухови апарати едно истинско решение за бъдещето на вашите пациенти по отношение на свързаността.

И всичко това – без необходимост от междинно устройство. Благодарение на технологията Bluetooth Low Energy можете да стриймвате през целия ден, като пестите живота на батерията.

За списък със съвместими смарт устройства вижте тук:

www.danalogic.co.uk/connectivity

danalogic Extend също така има възможност за провеждане на разговори със свободни ръце с избрани устройства Apple®. Разговорът със свободни ръце ви позволява да отговаряте на телефонни обаждания, като използвате слуховите си апарати – те ще действат като микрофон, за да улавят гласа ви, както и да предават звука от телефона директно в слуховите ви апарати. За списък на съвместимите с тази функция устройства Apple, моля, посетете уебсайта тук:


www.danalogic.co.uk/connectivity

Предимства на слуховите апарати с Bluetooth Low Energy

- Да говорите по телефона, докато носите слухови апарати, може да бъде трудна задача. Новите ви слухови апарати ще ви позволят да предавате директно телефонни и видеоразговори. Това улеснява чуването на казаното.
- Вече не е необходимо да носите слушалки, за да слушате музика, видеоклипове или други аудиоклипове от смарт устройството си, тъй като звукът ще се предава към слуховите ви апарати.


Свързване на слуховите ви апарати за Bluetooth стрийминг


Ако имате съвместимо смарт устройство, следвайте инструкциите в тази брошура, за да свържете слуховите си апарати към него.

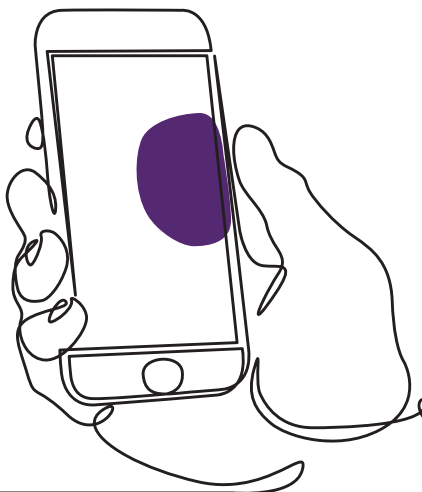

Как да сдвоите слуховите апарати със своето устройство Apple

1. Изключете слуховите си апарати.
2. Включете Bluetooth, като отидете в менюто Settings (Настройки) на устройството Apple. Плъзгачът става зелен, когато активирате Bluetooth.
3. Върнете се в главното меню „Settings“ (Настройки) и докоснете „Accessibility“ (Достъпност).
4. Превъртете надолу до „Hearing Devices“ (Слухови апарати).
5. Ако слуховите ви апарати вече са включени, рестартирайте ги. В противен случай, моля, включете слуховите си апарати. Така устройството Apple ще може да открие слуховите ви апарати.

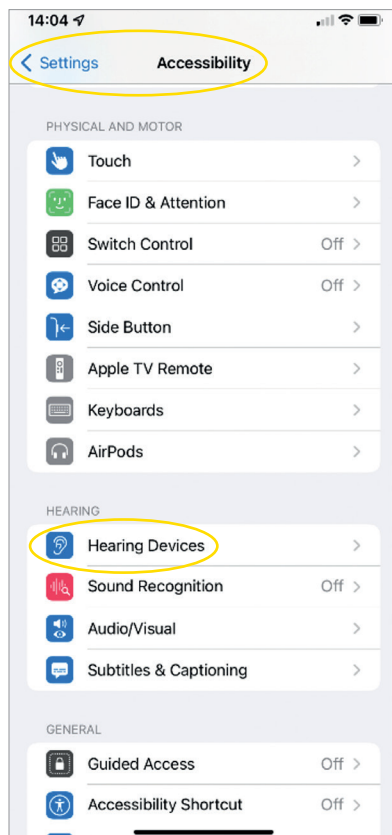

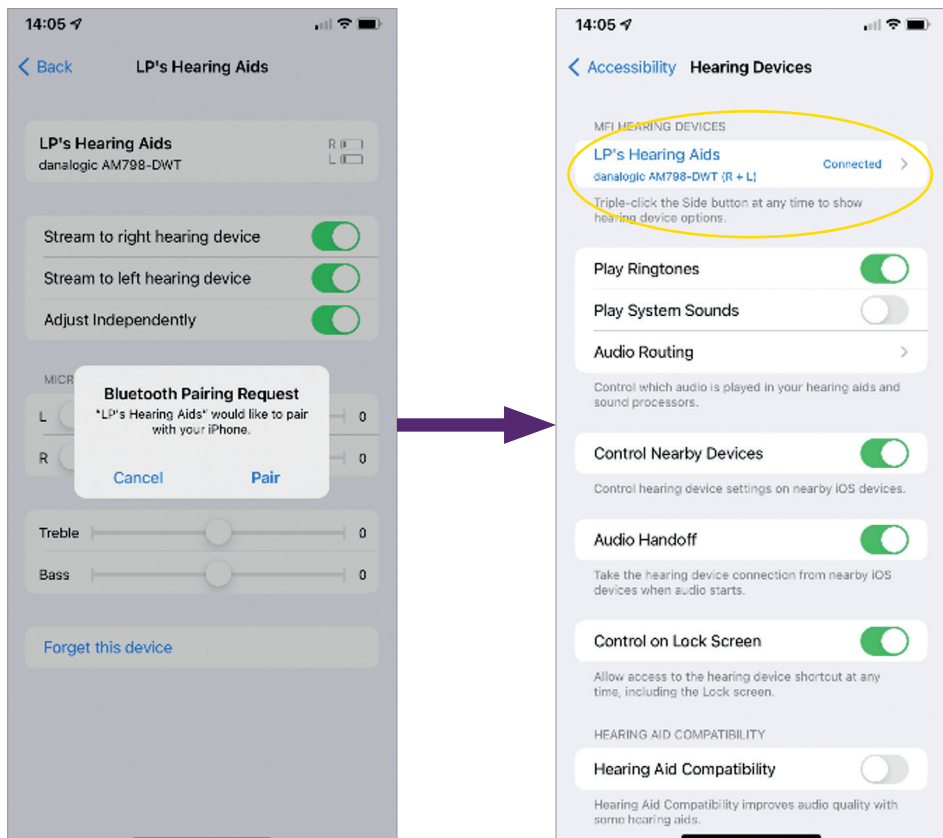


1. Докоснете „Pair“ (Сдвояване). Ако имате два слухови апарата, ще трябва да приемете два пъти.
2. Отидете в App Store и потърсете „BeMore“ за вашите слухови апарати.
3. Изтеглете приложението BeMore. Отворете го и докоснете „Get Started“ (Първи стъпки).
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да се свържете с приложението. С това сте готови.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това са стъпките и техния вид в iOS 13 и по-нови версии

Ако трябва да сдвоите отново своето устройство Apple

Ако единият или и двата ви слухови аппарата са били заменени, ще трябва да ги свържете отново със смарт устройството си.

1. Започнете с премахването на старите слухови апарати, като отидете в менюто „Settings“ (Настройки).
2. Превъртете надолу и изберете „Accessibility“ (Достъпност).
3. Изберете „Hearing Devices“ (Слухови апарати).
4. Изберете слуховите апарати на екрана в раздела „MFI Hearing Devices“ (Слухови апарати MFI) и докоснете „Forget this device“ (Забравяне на това устройство).
5. Рестартирайте новите си слухови апарати и натиснете „Pair“ (Сдвояване). Ако носите два слухови аппарата, ще трябва да докоснете два пъти „Pair“ (Сдвояване).

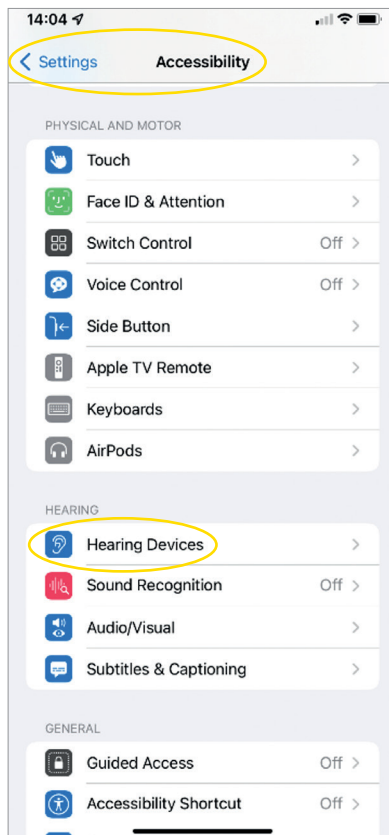


Как да се наслаждавате на разговори със свободни ръце за iPhone® и iPad® с danalogic Extend

Моля, уверете се, че устройството ви е съвместимо, като проверите на нашия уебсайт

www.danalogic.co.uk/connectivity

Функция	Как се извършва
Приемане на повикване	Използвайте кратко натискане на бутона на слуховия си апарат или плъзване, за да отговорите на iPhone/iPad
Прекратяване на повикване	Натиснете и задръжте бутона на слуховия си апарат за няколко секунди, за да прекратите повикването. Можете също така да затворите, като докоснете червения бутон на екрана
Второ входящо повикване	Ако провеждате разговор и получите второ входящо повикване, откажете го, като натиснете продължително бутона на слуховия си апарат или докоснете „Decline“ (Отказ) на екрана на iPhone или iPad
Промяна на силата на звука	Използвайте бутоните за увеличаване и намаляване на звука на iPhone или iPad
Изключване на повикванията със свободни ръце в настройките на слуховия апарат в iOS	Кликнете три пъти върху бутона за натискане на iPhone, за да получите достъп до настройките на слуховия апарат в iOS (можете да получите достъп и чрез Control Centre (Центъра за управление)). Изберете „Input Options“ (Опции за въвеждане) и след това „Off“ (Изкл.)

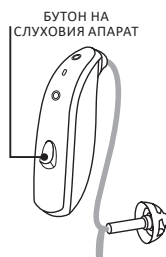


Сканирайте QR кода, за да получите достъп до видеоклипа с инструкции, или посетете сайта:

danalogic.co.uk/patient-portal

Как да сдвоите слуховите си апарати с устройство с Android™

1. Отидете в Google Play Store, потърсете BeMore и изтеглете приложението.
2. След като го изтеглите, отворете приложението и докоснете „Get Started“ (Започнете).
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да се свържете с приложението. С това сте готови.

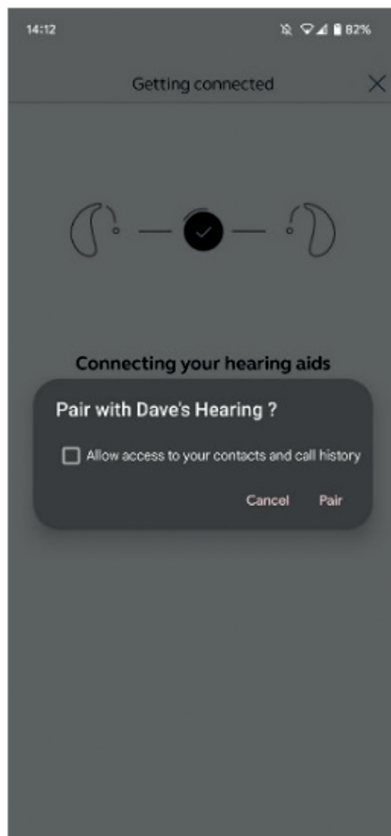

Ако трябва да сдвоите отново своето устройство с Android

Ако единият или и двата ви слухови апарата са били заменени, ще трябва да ги свържете отново със смарт устройството си.

1. Плъзнете надолу от горния край на екрана, за да отворите менюто „Settings“ (Настройки), след което задръжте иконата Bluetooth за 2 секунди.
2. Задръжте иконата Settings (Настройки) за Hearing Aids (Слухови апарати) за 2 секунди.
3. Изберете „Forget“ (Забравяне).
4. Отворете приложението BeMore.
5. Отворете „BeMore Menu“ (Меню на BeMore) и изберете „Pair new hearing aids“ (Сдвояване на нови слухови апарати). Следвайте инструкциите на екрана, за да се свържете. С това сте готови.





Ако изпитвате затруднения, вижте на нашия уебсайт **www.danalogic.co.uk/patient-portal** за повече насоки или се свържете с вашия аудиолог.



Сканирайте ме за незабавен достъп до поддръжка за слухови апарати, инструкции за грижа, видеоклипове с инструкции и други.

© 2024 GN Hearing A/S. Всички права запазени. Danalogic е търговска марка на GN Hearing A/S. Apple, логото на Apple, iPhone, iPad и iPod touch са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. App Store е марка за услуги на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни. Android, Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC. Словната марка и логата на Bluetooth са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. Словната марка и логата на Auracast са търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc.



danalogic GN

Danalogic от GN работи по-усилено, за да насърчава положителни резултати по време на целия път на пациента, като дава възможност на NHS да предоставя по-добри грижи там, където те са наистина важни.

Danalogic е част от GN Group – пионер в областта на страхотния звук – от водещи в света слухови апарати до офис слушалките и спортните слушалки Jabra. Основана е през 1869 г. и в нея работят над 5000 души. С GN животът звучи по-добре.

www.danalogic.co.uk



GN Hearing UK Ltd.
Unit 13,
Talisman Business Centre,
Bicester OX26 6HR
Тел.: +44 1869 352 800
Факс: +44 1869 343 466
danalogicuk@gnhearing.com
www.danalogic.co.uk