

danalogic GN

danalogic Extend

Twój nowy aparat
słuchowy
Bluetooth® Low
Energy Audio



Twój nowy aparat słuchowy danalogic Extend to pierwszy produkt z naszego katalogu NHS wykorzystujący najnowocześniejszy standard Bluetooth® Low Energy Audio

Rozwiązanie Bluetooth LE Audio jest owocem współpracy firmy z branży elektroniki konsumenckiej oraz producentów aparatów słuchowych. Bluetooth LE Audio cechuje się niskim poborem mocy, wysoką jakością dźwięku oraz niezwykle niską latencją. Dzięki technologii Bluetooth LE Audio możesz połączyć aparat słuchowy bezpośrednio z telewizorem, laptopem lub innym urządzeniem obsługującym interfejs Bluetooth 5.3. Produkt danalogic Extend jest domyślnie wyposażony w ten protokół, a dodatkowo odbiera zawartość przesyłaną strumieniowo za pośrednictwem technologii Auracast. To pozycja, która posłuży Twoim pacjentom przez wiele lat, gdyż obsługuje standardy komunikacji przyszłości.

Dodatkową zaletą jest eliminacja urządzenia pośredniego do łączenia się z jednostkami. Dzięki technologii Bluetooth Low Energy możesz cieszyć się strumieniowaniem przez cały dzień bez obaw o rozładowaną baterię.

Listę zgodnych urządzeń inteligentnych znajdziesz tutaj:

www.danalogic.co.uk/connectivity

Produkt danalogic Extend w połączeniu z wybranymi urządzeniami firmy Apple® może działać jako zestaw głośnomówiący. Funkcja zestawu głośnomówiącego umożliwia odbieranie połączeń telefonicznych za pośrednictwem aparatów słuchowych, które pełnią wtedy funkcję mikrofonu zbierającego głos, a także słuchanie zawartości strumieniowanej bezpośrednio z telefonu. Listę urządzeń firmy Apple zgodnych z tą funkcją znajdziesz tutaj:


www.danalogic.co.uk/connectivity

Zalety aparatów słuchowych Bluetooth Low Energy

- Rozmowa przez telefon z założonym aparatem słuchowym może rodzić pewne trudności. Twoje nowe aparaty słuchowe mają funkcję bezpośredniego strumieniowania połączeń telefonicznych i wideorozmów. Dzięki nim łatwiej słuchać rozmówców.
- Od dziś nie musisz zakładać słuchawek, aby posłuchać muzyki, obejrzeć film czy cieszyć się zawartością audio z urządzenia inteligentnego, gdyż dźwięk będzie przesyłany strumieniowo bezpośrednio do aparatów słuchowych.


Połączenie aparatów słuchowych przez interfejs Bluetooth w celu strumieniowania


Jeśli masz zgodne urządzenie inteligentne, postępuj zgodnie z instrukcjami w tej broszurce, aby połączyć z nim aparaty słuchowe.

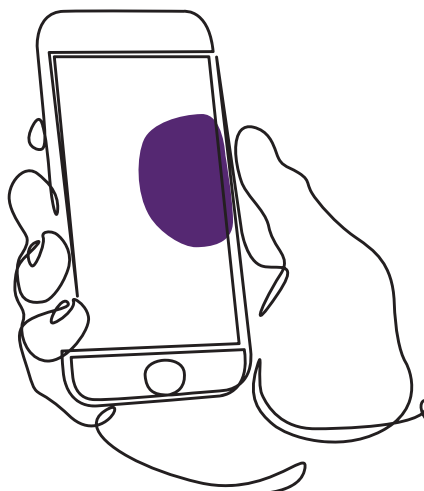

Parowanie aparatu słuchowego z urządzeniem firmy Apple

1. Wyłącz aparaty słuchowe.
2. Włącz interfejs Bluetooth, przechodząc do menu „Ustawienia” na urządzeniu firmy Apple. Po aktywacji interfejsu Bluetooth suwak zmieni kolor na zielony.
3. Wróć do menu głównego aplikacji Ustawienia i dotknij opcji „Ułatwienia dostępu”.
4. Przewiń w dół do pozycji „Systemy słyszenia”.
5. Jeśli aparaty słuchowe są już włączone, uruchom je ponownie. W przeciwnym wypadku włącz aparaty słuchowe. Dzięki temu Twoje urządzenie firmy Apple może wykryć aparaty słuchowe.

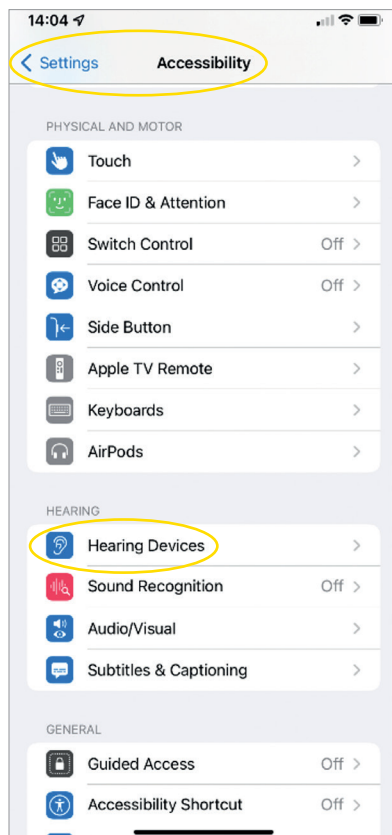

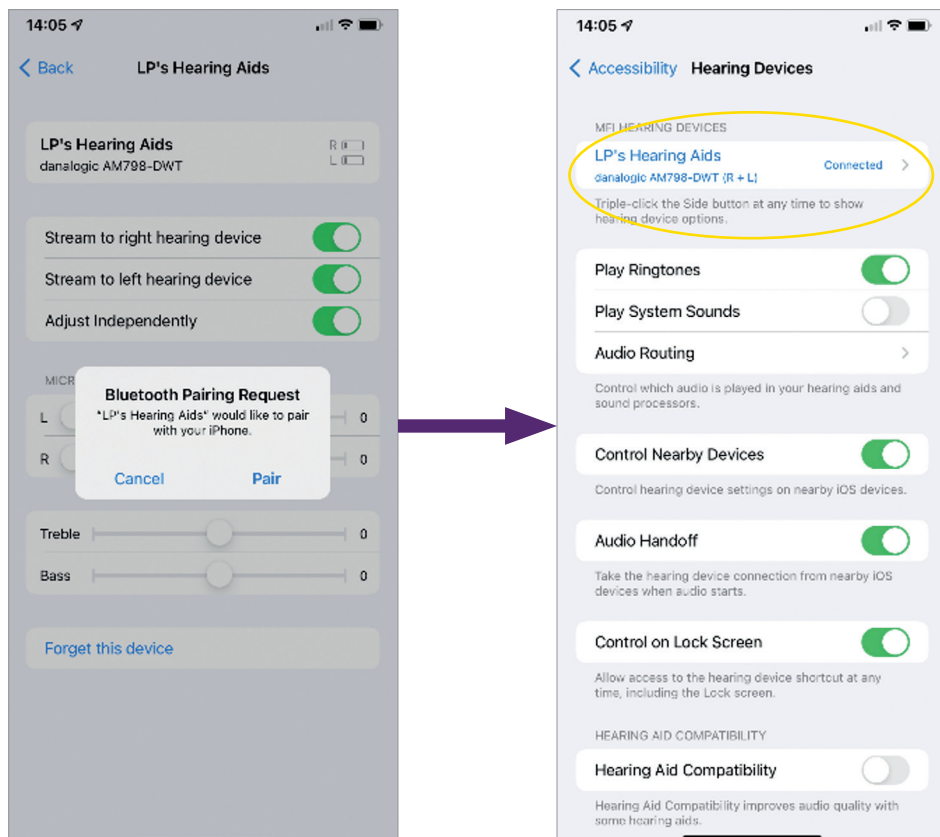


1. Dotknij opcji „Paruj”. Jeśli masz dwa aparaty słuchowe, musisz zaakceptować każdy z nich.
2. Przejdź do sklepu App Store i wyszukaj aplikację „BeMore” do obsługi aparatów słuchowych.
3. Pobierz aplikację BeMore. Otwórz aplikację i dotknij opcji „Zaczynamy”.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby połączyć się z aplikacją. Już możesz korzystać z aplikacji.

UWAGA: Przedstawione kroki i ekrany występują w przypadku systemu iOS 13 lub nowszego.

Ponowne parowanie z urządzeniem firmy Apple

Po wymianie aparatu słuchowego musisz sparować nowy aparat z urządzeniem inteligentnym.

1. Zaczynij od usunięcia starych aparatów słuchowych w menu Ustawienia.
2. Przewiń w dół i wybierz opcję „Ułatwienia dostępu”.
3. Wybierz opcję „Systemy słyszenia”.
4. Wybierz aparaty słuchowe na ekranie pod sekcją „Systemy słyszenia MFI” i dotknij opcji „Zapomnij to urządzenie”.
5. Uruchom ponownie nowe aparaty słuchowe i naciśnij opcję „Paruj”. Jeśli masz założone dwa aparaty słuchowe, musisz wybrać opcję „Paruj” w przypadku każdego z nich.

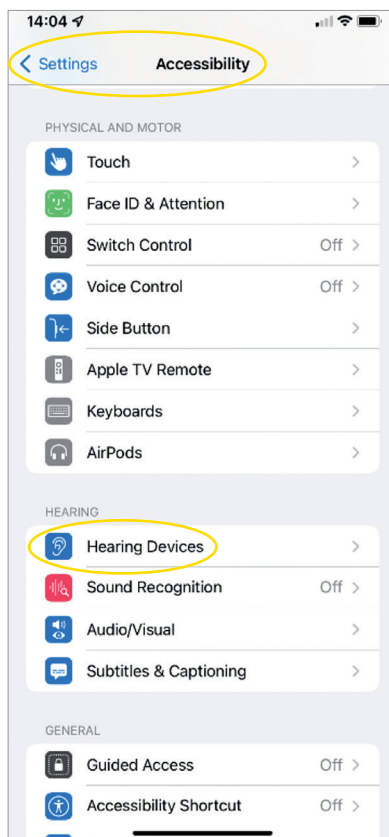


Obsługa funkcji zestawu głośnomówiącego produktu danalogic Extend zgodnej z telefonami iPhone® i urządzeniami iPad®

Aby upewnić się, że Twoje urządzenie jest zgodne z funkcją, wejdź na stronę internetową www.danalogic.co.uk/connectivity

Funkcja	Obsługa
Odbieranie połączeń	Naciśnij przycisk aparatu słuchowego lub przeciągnij, aby odebrać połączenie przychodzące na telefonie iPhone/iPadzie.
Kończenie połączeń	Naciśnij i przytrzymaj przycisk aparatu słuchowego przez kilka sekund, aby zakończyć połączenie. Ewentualnie zakończ połączenie, dotykając czerwonego przycisku na ekranie.
Drugie połączenie przychodzące	Jeśli ktoś spróbuje się z Tobą skontaktować, gdy prowadzisz już rozmowę telefoniczną, możesz odrzucić połączenie, naciskając i przytrzymując przycisk aparatu słuchowego, ewentualnie dotykając opcji „Odrzuć” na telefonie iPhone lub iPadzie.
Regulacja głośności	Do obsługi funkcji służą przyciski zwiększania i zmniejszania głośności na telefonie iPhone lub iPadzie
Wyłączanie zestawu głośnomówiącego w ustawieniach aparatu słuchowego w systemie iOS	Trzykrotnie kliknij przycisk push telefonu iPhone, aby uzyskać dostęp do ustawień aparatu słuchowego w systemie iOS (dostęp jest możliwy także z centrum sterowania). Wybierz opcję „Opcje wprowadzania”, a następnie opcję „Wyl.”.


PRZYCISK APARATU SŁUCHOWEGO

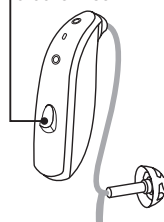

Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film instruktażowy, ewentualnie wejdź na stronę: danalogic.co.uk/patient-portal

Parowanie aparatu słuchowego z urządzeniem z systemem Android™

1. Wejdź do sklepu Google Play, po czym wyszukaj i pobierz aplikację BeMore.
2. Po pobraniu otwórz aplikację i dotknij opcji „Zaczynamy”.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby połączyć się z aplikacją. Już możesz korzystać z aplikacji.

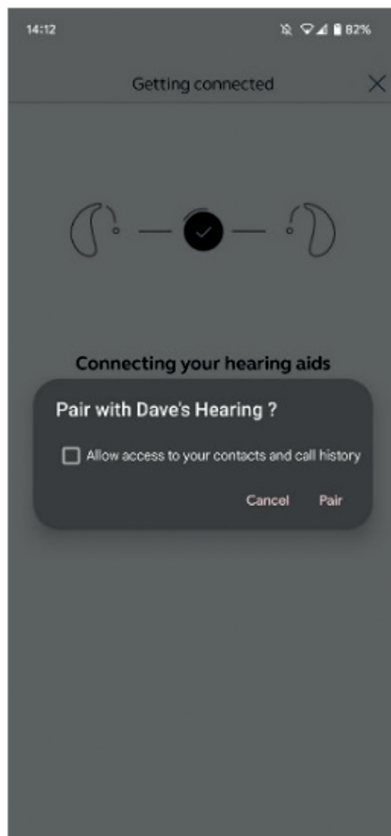

Ponowne parowanie z urządzeniem z systemem Android

Po wymianie aparatu słuchowego musisz sparować nowy aparat z urządzeniem inteligentnym.

1. Przeciągnij do dołu od góry ekranu, aby otworzyć menu „Ustawienia”, a następnie naciśnij i przytrzymaj ikonę Bluetooth przez 2 sekundy.
2. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aparatów słuchowych przez 2 sekundy.
3. Wybierz opcję „Zapomnij”.
4. Otwórz aplikację BeMore.
5. Otwórz „Menu BeMore” i wybierz opcję „Paruj nowy aparat słuchowy”. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie. Już możesz korzystać z aplikacji.



W razie trudności na naszej stronie internetowej **www.danalogic.co.uk/patient-portal**



Zeskanuj mnie, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do wsparcia w zakresie aparatu słuchowego, wytycznych w zakresie konserwacji, instruktaży wideo i innej zawartości.

© 2024 GN Hearing A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone. Danalogic to znak towarowy spółki GN Hearing A/S. Apple, logo Apple, iPhone, iPad i iPod touch to znaki towarowe spółki Apple Inc. zarejestrowane w USA i w innych krajach. App Store to znak usługi spółki Apple Inc. zarejestrowany w USA i w innych krajach. Android, Google Play i logo Google Play logo to znaki towarowe spółki Google LLC. Znak i logo Bluetooth to zarejestrowane znaki towarowe spółki Bluetooth SIG, Inc. Słowo i logo Auracast to znaki towarowe będące własnością spółki Bluetooth SIG, Inc.



danalogic GN

Spółka danalogic należąca do GN pracuje z oddaniem, aby pacjent korzystał na każdym etapie swojej podróży, a w ramach systemów NHS zapewniana była opieka zdrowotna na jeszcze wyższym poziomie.

Spółka danalogic jest częścią GN Group, grupy będącej pionierem w obszarze dźwięku. Grupa wytwarza wiodące na świecie systemy słyszenia, a także biurowe i sportowe zestawy słuchawkowe marki Jabra. Powstała w 1869 roku, a obecnie zatrudnia ponad 5000 osób. Z GN życie brzmi lepiej.

www.danalogic.co.uk



GN Hearing UK Ltd.
Unit 13,
Talisman Business Centre,
Bicester OX26 6HR
Nr tel.: +44 1869 352 800
Faks: +44 1869 343 466
danalogicuk@gnhearing.com
www.danalogic.co.uk