

danalogic GN

danalogic Extend

Слуховые
аппараты с
технологией
Bluetooth®
Low Energy
Audio



Новые слуховые аппараты danalogic Extend — наша первая линейка NHS, в которой реализован совершенно новый протокол Bluetooth® Low Energy Audio

Протокол Bluetooth LE Audio был разработан в сотрудничестве с представителями отрасли бытовой электроники и производителями слуховых аппаратов. Протокол Bluetooth LE Audio оптимизирован для низкого энергопотребления, высокого качества звука и очень низкой задержки. С помощью Bluetooth LE Audio можно будет устанавливать прямые соединения слуховых аппаратов с телевизором, ноутбуком или другими устройствами, совместимыми с Bluetooth 5.3. Этот новый протокол встроен в устройства danalogic Extend по умолчанию, и также может быть подключен к потокам вещания Auracast. Таким образом, это действительно перспективное решение в плане подключения для ваших пациентов.

При этом промежуточное устройство для подключения устройств не требуется. Благодаря технологии Bluetooth Low Energy можно вести потоковое вещание в течение всего дня, сохраняя заряд батареи.

Список совместимых смарт-устройств можно найти здесь:

www.danalogic.co.uk/connectivity

Danalogic Extend также поддерживает функцию громкой связи с некоторыми устройствами Apple®. Функция громкой связи позволяет отвечать на телефонные звонки с помощью слухового аппарата, при этом слуховой аппарат будет выступать в роли микрофона, улавливая ваш голос, а также передавать звук с телефона непосредственно в слуховой аппарат. Список совместимых устройств Apple для этой функции можно найти на этой странице:


www.danalogic.co.uk/connectivity

Преимущества слуховых аппаратов с технологией Bluetooth Low Energy

- При ношении слуховых аппаратов могут возникать трудности с телефонными звонками. Ваш новый слуховой аппарат позволит напрямую транслировать телефонные и видеозвонки. Это позволяет лучше слышать собеседника.
- Вам больше не придется надевать наушники, чтобы слушать музыку, видео или другой аудиоматериал со смарт-устройства, поскольку звук будет транслироваться в слуховой аппарат.


Подключение слуховых аппаратов для передачи данных по Bluetooth



Если у вас есть совместимое смарт-устройство, следуйте инструкциям в этой брошюре, чтобы подключить к нему свой слуховой аппарат.

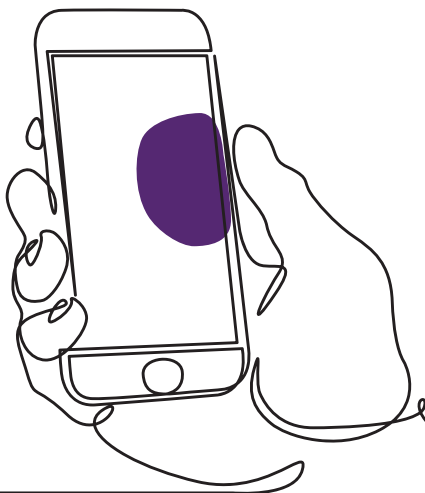

Как объединить в пару слуховой аппарат и устройство Apple

1. Выключите слуховой аппарат.
2. Включите Bluetooth, перейдя в меню Settings (Настройки) на устройстве Apple. После включения Bluetooth ползунок станет зеленым.
3. Вернитесь в главное меню Settings (Настройки) и нажмите на Accessibility (Универсальный доступ).
4. Прокрутите вниз до раздела Hearing Devices (Слуховые устройства).
5. Если ваш слуховой аппарат уже включен, перезапустите его. Если еще нет, включите его. Это позволит устройству Apple обнаружить слуховой аппарат.

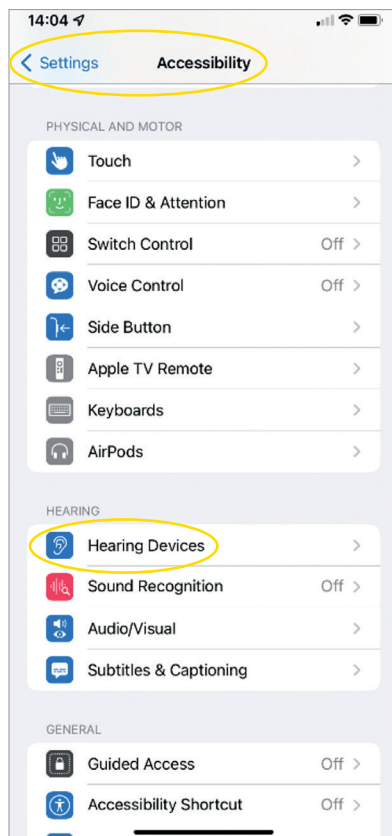

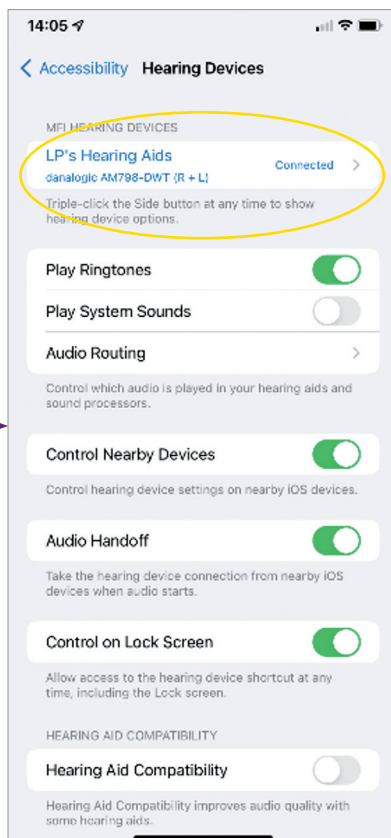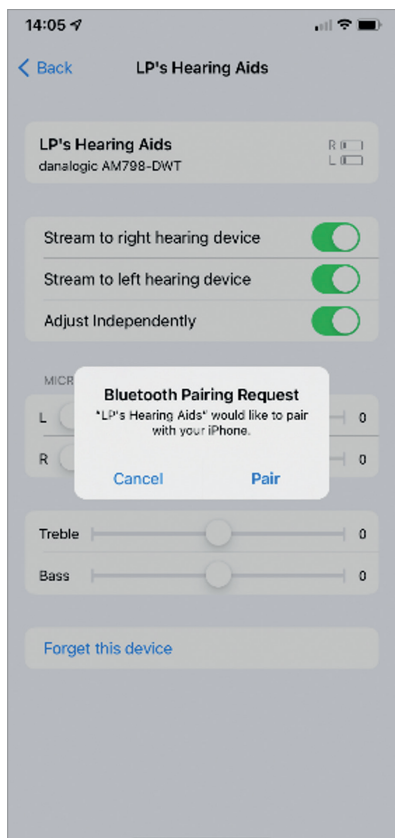


1. Нажмите на Pair (Создать пару). Если у вас два слуховых аппарата, вам придется согласиться дважды.
2. Зайдите в App Store и найдите приложение BeMore для своего слухового аппарата.
3. Загрузите приложение BeMore. Откройте его и нажмите Get Started (Начать работу).
4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключиться к приложению. Теперь вы готовы к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Здесь приведены шаги для выполнения и вид меню в iOS 13 и более поздней версии.

Если нужно повторно подключить устройство Apple

Если один или оба слуховых аппарата были заменены, вам нужно будет заново создать пару со смарт-устройством.


1. Для начала удалите старые слуховые аппараты, перейдя в меню Settings (Настройки).
2. Прокрутите вниз и выберите Accessibility (Универсальный доступ).
3. Выберите Hearing Devices (Слуховые устройства).
4. Выберите слуховой аппарат на экране в разделе MFI Hearing Devices (Слуховые аппараты MFI) и нажмите Forget this device (Забыть это устройство).
5. Перезапустите новые слуховые аппараты и нажмите Pair (Создать пару). При использовании двух слуховых аппаратов нужно будет нажать Pair (Создать пару) дважды.

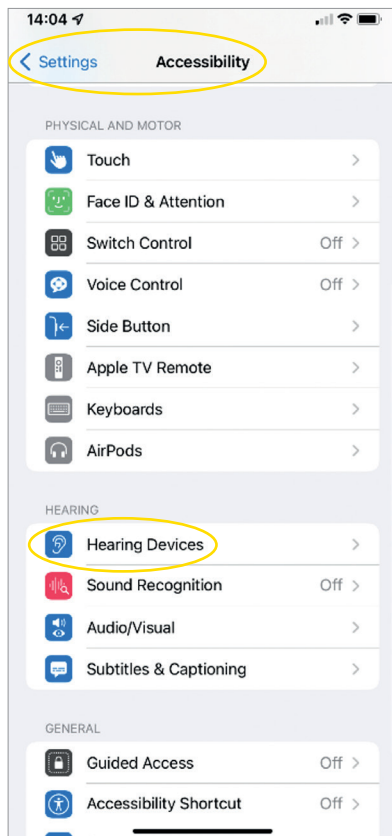

Как пользоваться функцией бесконтактной связи для iPhone® и iPad® с помощью danalogic Extend

Проверьте совместимость устройства, перейдя на наш веб-сайт: www.danalogic.co.uk/connectivity


Функция	Способ использования
Ответ на звонок	На iPhone/iPad для ответа используйте короткое нажатие на кнопку слухового аппарата или смахните
Завершение вызова	Чтобы завершить вызов, нажмите и удерживайте кнопку слухового аппарата в течение нескольких секунд. Также можно завершить вызов, нажав красную кнопку на экране
Вторые входящие вызовы	Если вы разговариваете по телефону и вам поступает второй вызов, отклоните его, нажимая и удерживая кнопку слухового аппарата или коснувшись кнопки Decline (Отклонить) на экране iPhone или iPad
Регулирование громкости	Используйте кнопки увеличения и уменьшения громкости на iPhone или iPad
Отключите бесконтактную связь в настройках iOS для слухового аппарата	Трижды нажмите на кнопку iPhone, чтобы получить доступ к настройкам iOS слухового аппарата (также можно получить доступ через Центр управления). Выберите Input Options (Параметры ввода), затем Off (Выключить)

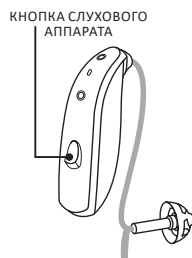

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к видеоролику о том, как это сделать, или перейдите на сайт: danalogic.co.uk/patient-portal

Как объединить в пару слуховой аппарат и устройство Android™

1. Зайдите в магазин Google Play, найдите и скачайте приложение BeMore.
2. После загрузки откройте приложение и нажмите Get Started (Начать работу).
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключиться к приложению. Теперь вы готовы к использованию.

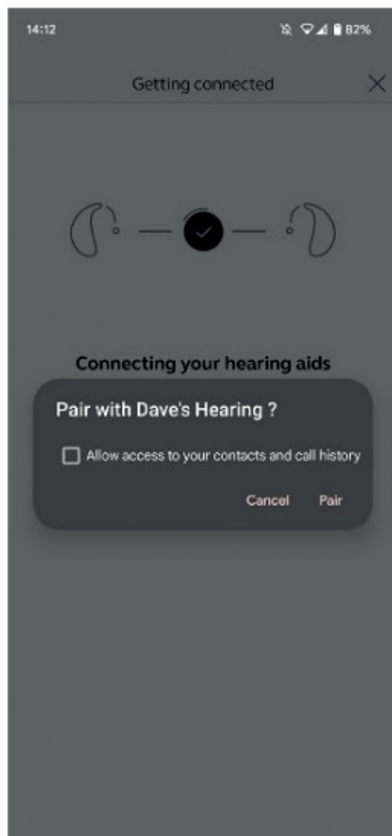

Если нужно повторно подключить устройство Android

Если один или оба слуховых аппарата были заменены, вам нужно будет заново создать пару со смарт-устройством.

1. Проведите пальцем вниз от верхней части экрана, чтобы открыть меню Settings (Настройки), затем удерживайте значок Bluetooth в течение 2 секунд.
2. Удерживайте пиктограмму Settings (Настройки) для слухового аппарата в течение 2 секунд.
3. Выберите Forget (Забыть).
4. Откройте приложение BeMore.
5. Откройте меню BeMore и выберите Pair new hearing aids (Подключить новый слуховой аппарат). Затем следуйте инструкциям для подключения, которые появятся на экране. Теперь вы готовы к использованию.



Если у вас возникли трудности, см.
дополнительные инструкции на нашем сайте
www.danalogic.co.uk/patient-portal или
обратитесь к своему аудиологу.



Отсканируйте здесь, чтобы получить мгновенный доступ к поддержке слуховых аппаратов, инструкциям по уходу, видеороликам и другим материалам.

© 2024 GN Hearing A/S. Все права защищены. Danalogic является товарным знаком компании GN Hearing A/S. Apple, логотип Apple, iPhone, iPad и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. Android, Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками компании Google LLC. Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. Словесный знак Auracast и логотипы являются товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc.



Danalogic от GN работает еще усерднее, чтобы добиться положительных результатов на любом этапе использования устройств пациентами, позволяя NHS оказывать более качественную помощь там, где это действительно важно.

Danalogic входит в группу компаний GN Group, которая является первопроходцем в создании отличного звука, начиная от ведущих слуховых аппаратов и заканчивая офисными гарнитурами Jabra и спортивными наушниками. Основанная в 1869 году, компания насчитывает более 5000 сотрудников. GN дает жизни лучшее звучание.

www.danalogic.co.uk



GN Hearing UK Ltd.
Unit 13,
Talisman Business Centre,
Bicester OX26 6HR
Тел.: +44 1869 352 800
Факс: +44 1869 343 466
danalogicuk@gnhearing.com
www.danalogic.co.uk