

danalogic GN

danalogic Extend

Su nuevo Bluetooth® Audífonos Low Energy Audio



Sus nuevos audífonos danalogic Extend, nuestra primera gama NHS que incorpora el nuevo protocolo Bluetooth® Low Energy Audio

Bluetooth LE Audio ha sido desarrollado en colaboración con la industria de la electrónica de consumo y los fabricantes de audífonos. Bluetooth LE Audio está optimizado para un bajo consumo de energía, una alta calidad de audio y una latencia muy baja. Con Bluetooth LE Audio, será posible establecer conexiones directas desde el televisor, el ordenador portátil u otros dispositivos compatibles con Bluetooth 5.3, a los audífonos. danalogic Extend tiene este nuevo protocolo incorporado por defecto y también se puede conectar a los flujos de transmisión Auracast. Esto significa que se trata de una solución verdaderamente preparada para el futuro para sus pacientes en términos de conectividad.

Todo ello sin necesidad de un dispositivo intermedio para conectar las unidades. Gracias a la tecnología Bluetooth Low Energy, puede transmitir durante todo el día preservando la duración de la batería.

Para ver la lista de dispositivos inteligentes compatibles, consulte aquí **www.danalogic.co.uk/connectivity**


Danalogic Extend también permite realizar llamadas manos libres con determinados dispositivos Apple®. Las llamadas con manos libres le permiten responder a llamadas telefónicas utilizando sus audífonos, que actuarán como un micrófono para captar su voz, así como transmitir el sonido de su teléfono directamente a sus audífonos. Para consultar la lista de dispositivos Apple compatibles con esta función, visite el sitio web **www.danalogic.co.uk/connectivity**

Ventajas de los audífonos con Bluetooth Low Energy

- Las llamadas telefónicas con audífonos pueden resultar complicadas. Sus nuevos audífonos le permitirán transmitir directamente tanto llamadas como videollamadas. Esto hace que sea más fácil oír lo que se dice.
- Ya no tendrá que llevar auriculares para escuchar música, vídeos u otro tipo de audio desde su dispositivo inteligente, ya que el sonido se transmitirá a sus audífonos.


Conexión de los audífonos para la transmisión por Bluetooth



Si dispone de un dispositivo inteligente compatible, siga las instrucciones de este folleto para conectar sus audífonos a él.

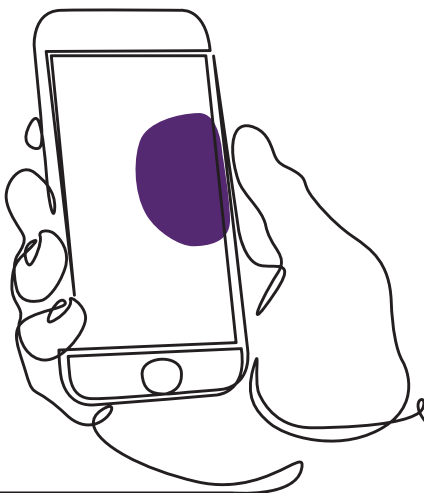

Cómo emparejar los audífonos con su dispositivo Apple

1. Apague sus audífonos.
2. Active el Bluetooth en el menú «Ajustes» de su dispositivo Apple. El control deslizante se vuelve verde cuando activa el Bluetooth.
3. Vuelva al menú principal de «Ajustes» y pulse «Accesibilidad».
4. Desplácese hasta «Dispositivos auditivos».
5. Si los audífonos ya están encendidos, reinícielos. En caso contrario, encienda los audífonos. Esto garantizará que su dispositivo Apple pueda detectar sus audífonos.

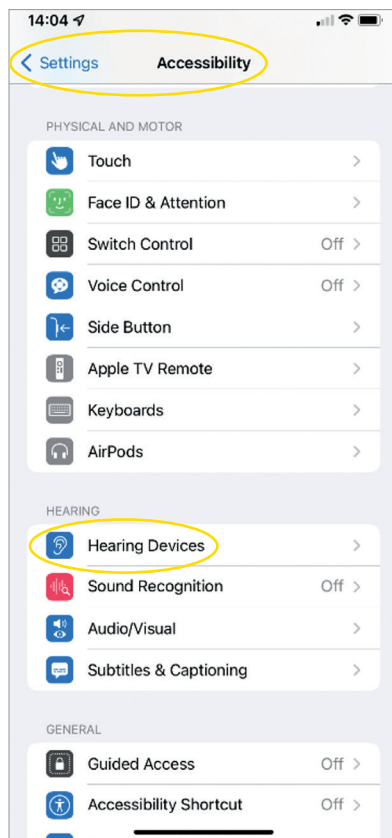

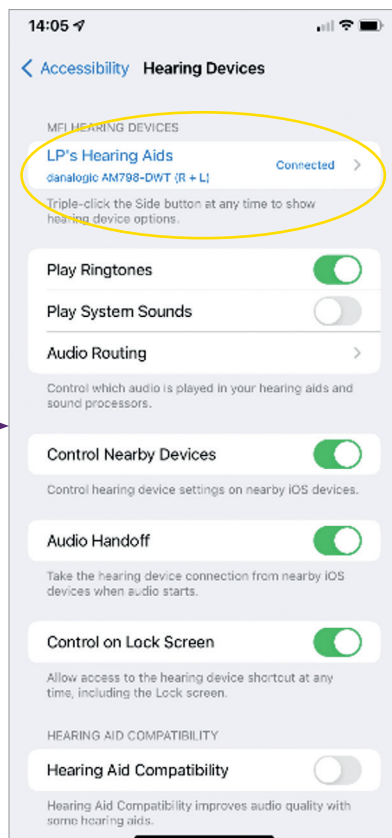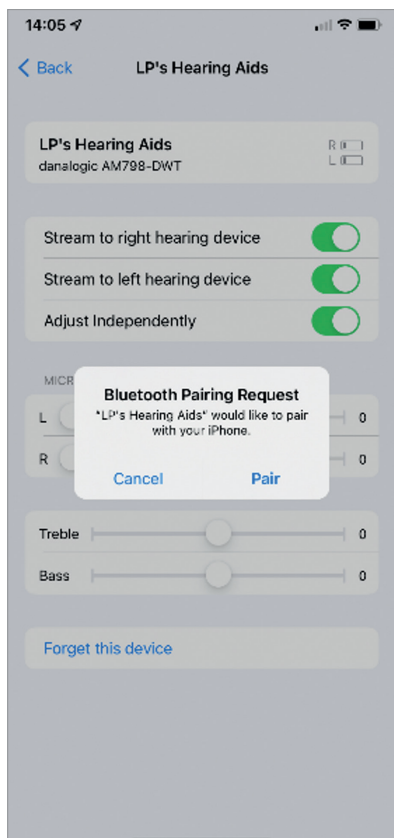


1. Pulse «Emparejar». Si tiene dos audífonos, tendrá que aceptar dos veces.
2. Vaya a la App Store y busque «BeMore» para sus audífonos.
3. Descargue la aplicación «BeMore». Ábrala y pulse «Empezar».
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conectarse a la aplicación. Ya está listo para empezar.

NOTA: Estos son los pasos y cómo se ve en iOS 13 y posteriores versiones

Si necesita volver a emparejar su dispositivo Apple

Si uno o ambos audífonos han sido sustituidos, tendrá que volver a emparejarlos con su dispositivo inteligente.


1. Para empezar, quítese los audífonos antiguos yendo al menú «Ajustes».
2. Desplácese hacia abajo y seleccione «Accesibilidad».
3. Seleccione «Dispositivos auditivos».
4. Seleccione los audífonos en pantalla en la sección «Dispositivos auditivos MFi» y pulse «Olvidar este dispositivo».
5. Reinicie sus nuevos audífonos y pulse «Emparejar». Tendrá que pulsar «Emparejar» dos veces si lleva dos audífonos.

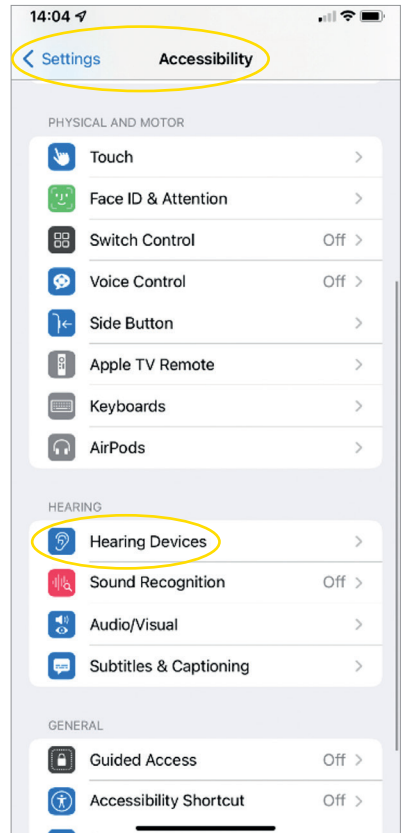

Cómo disfrutar de llamadas con manos libres para iPhone® y iPad® con danalogic Extend

Asegúrese de que su dispositivo es compatible consultando nuestro sitio web www.danalogic.co.uk/connectivity


Función	Cómo
Responder a una llamada	Pulse brevemente el botón de su audífono o deslice para responder en el iPhone/iPad
Finalizar una llamada	Mantenga pulsado el botón del audífono durante unos segundos para finalizar la llamada. También puede colgar pulsando el botón rojo de la pantalla
Segundas llamadas entrantes	Si está en una llamada y recibe otra, recházela pulsando prolongadamente el botón del audífono o pulsando «Rechazar» en la pantalla del iPhone o iPad
Cambiar el volumen	Utilice los botones para subir y bajar el volumen del iPhone o iPad
Desactive las llamadas con manos libres en los ajustes del audífono iOS	Haga triple clic en el pulsador del iPhone para acceder a los ajustes del audífono de iOS (también puede acceder a través del Centro de control). Seleccione «Opciones de entrada» y, a continuación, «Desactivado»

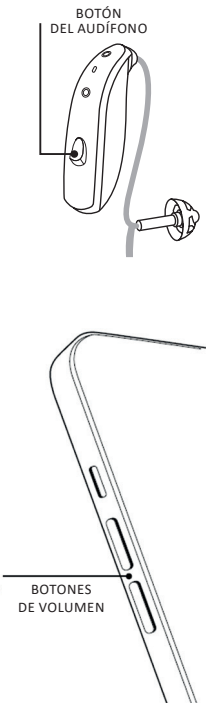

Escanee el código QR para acceder al vídeo explicativo o visítelo:
danalogic.co.uk/patient-portal

Cómo emparejar los audífonos con su dispositivo Android™

1. Vaya a Google Play Store, busque «BeMore» y descargue la aplicación.
2. Una vez descargada, abra la aplicación y pulse «Empezar».
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conectarse a la aplicación. Ya está listo para empezar.

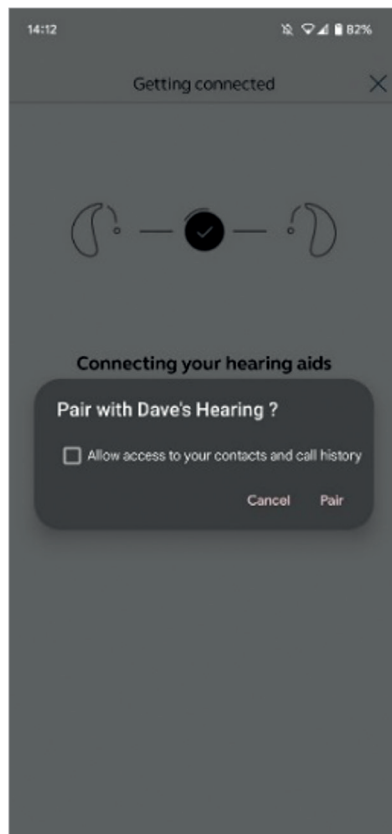

Si necesita volver a emparejar su dispositivo Android

Si uno o ambos audífonos han sido sustituidos, tendrá que volver a emparejarlos con su dispositivo inteligente.

1. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el menú «Ajustes» y, a continuación, mantenga pulsado el icono Bluetooth durante 2 segundos.
2. Mantenga pulsado el icono de «Ajustes» de audífonos durante 2 segundos.
3. Seleccione «Olvidar».
4. Abra la aplicación «BeMore».
5. Abra «Menú BeMore» y seleccione «Emparejar nuevos audífonos». A continuación, siga las instrucciones en pantalla para conectarse. Ya está listo para empezar.



Si tiene dificultades, consulte nuestro sitio web **www.danalogic.co.uk/patient-portal** para obtener más orientación o póngase en contacto con su audiólogo.



Escanéeme para obtener acceso instantáneo a asistencia sobre audífonos, instrucciones de cuidado, vídeos de instrucciones y mucho más.

© 2024 GN Hearing A/S. Todos los derechos reservados. Danalogic es una marca comercial de GN Hearing A/S. Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. registrada en EE. UU. y otros países. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. La marca denominativa Bluetooth y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La marca denominativa y los logotipos de Auracast son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.



Danalogic de GN trabaja más duro para impulsar resultados positivos en todo el proceso del paciente, permitiendo que el NHS ofrezca una mejor atención donde realmente importa.

Danalogic forma parte del Grupo GN, pionero en sonido de calidad, desde audífonos líderes en el mundo hasta auriculares Jabra para la oficina y auriculares deportivos. Fundada en 1869 y con más de 5000 empleados. GN hace que la vida suene mejor.

www.danalogic.co.uk



GN Hearing UK Ltd.
Unit 13,
Talisman Business Centre,
Bicester OX26 6HR
Tel.: +44 1869 352 800
Fax: +44 1869 343 466
danalogicuk@gnhearing.com
www.danalogic.co.uk