

danalogic GN

danalogic Extend

Ваш новий
слуховий
апарат з
Bluetooth®
Low Energy
Audio



Ваш новий слуховий апарат danalogic Extend, наша перша лінійка NHS з новим протоколом Bluetooth® Low Energy Audio

Протокол Bluetooth LE Audio був розроблений сумісно з галуззю побутової електроніки та виробниками слухових апаратів. Bluetooth LE Audio оптимізовано для низької витрати енергії, споживання, високої якості звуку та дуже низької затримки. Завдяки Bluetooth LE Audio є можливість встановити пряме підключення слухового апарату до телевізора, ноутбука або інших пристроїв, сумісних з Bluetooth 5.3. В danalogic Extend цей новий протокол вбудовано за промовчанням, а також він може підключатися до трансляцій Auracast. Це підключення полегшить пацієнтам роботу в майбутньому.

Проміжні пристрої для підключення не потрібні. Завдяки технології Bluetooth Low Energy ви можете передавати звук, зберігаючи заряд батареї.

Список сумісних пристроїв можна переглянути тут:

www.danalogic.co.uk/connectivity

Danalogic Extend також пропонує функцію «хендс-фрі» для обраних пристроїв Apple®. Функція «хендс-фрі» дозволяє відповідати на телефонні дзвінки за допомогою слухового апарата, який буде слугувати мікрофоном, сприймаючи голос та передаючи звук з телефона безпосередньо на ваш слуховий апарат. Список сумісних пристроїв Apple для цієї функції можна переглянути тут:


www.danalogic.co.uk/connectivity

Переваги слухових апаратів з Bluetooth Low Energy

- Телефонні дзвінки під час носіння слухового апарату можуть бути ненадійними. Ваш новий слуховий апарат дозволить вам безпосередньо передавати телефонні та відеодзвінки. Завдяки цьому легше почути те, що говорять.
- Вам більше не потрібно носити навушники, щоб слухати музику, відео чи інше аудіо на вашому пристрої, оскільки звук буде передаватися на ваш слуховий апарат.


Підключення слухового апарата для передачі через Bluetooth



Якщо у вас є сумісний пристрій, дотримуйтеся інструкцій в цій брошурі, щоб підключити слуховий апарат.

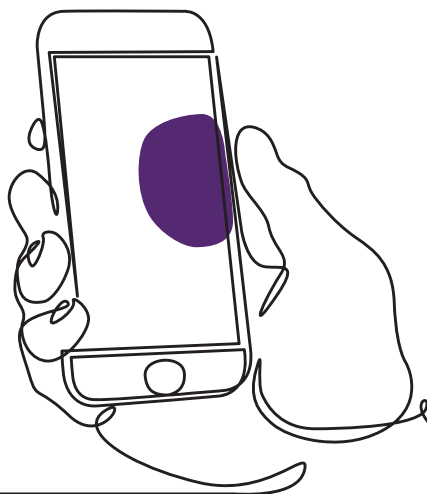

Як з'єднати слуховий апарат з вашим пристроєм Apple

1. Вимкніть слуховий апарат.
2. Увімкніть Bluetooth в меню «Параметри» вашого пристрою Apple. Після активації Bluetooth перемикач стане зеленим.
3. Поверніться до голосного меню параметрів та торкніться «Доступність».
4. Прокрутіть вниз до «Слухові пристрої».
5. Якщо ваш слуховий апарат вже увімкнений, перезапустіть його. В іншому випадку увімкніть слуховий апарат. Таким чином ваш пристрій Apple знайде ваш слуховий апарат.

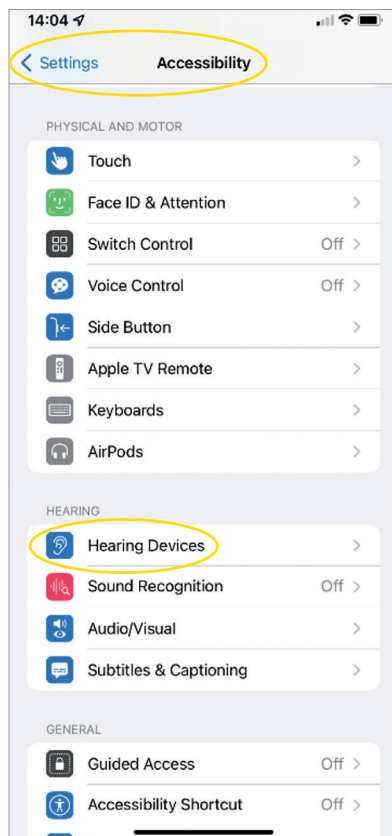

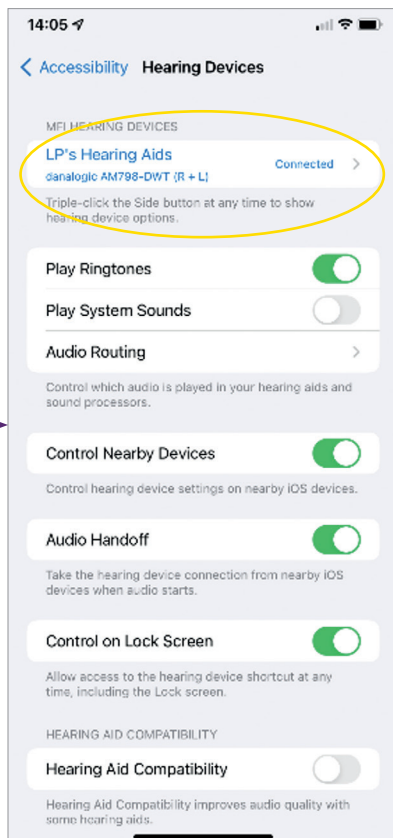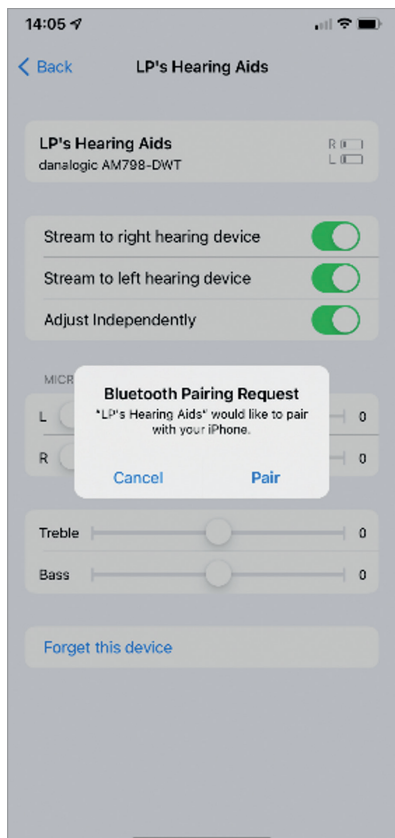


1. Натисніть на створення пари. Якщо у вас два слухових апарати, вам треба прийняти двічі.
2. Перейдіть до App Store та знайдіть BeMore для слухового апарата.
3. Завантажте додаток BeMore. Відкрийте його та торкніться «Початок роботи».
4. Дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб підключитися до додатка. Тепер все готово до роботи.

ПРИМІТКА. Тут наведені кроки та вигляд для iOS 13 та більш нової версії

Якщо треба повторно з'єднати пристрій Apple

Якщо один або обидва слухові апарати були замінені, вам треба повторно з'єднати їх з вашим пристроєм.

1. Старий слуховий апарат можна видалити в меню «Параметри».
2. Прокрутіть вниз та оберіть «Доступність».
3. Оберіть «Слухові пристрої».
4. Оберіть слуховий апарат на екрані в розділі «Слухові пристрої MFі» та торкніться «Забути цей пристрій».
5. Перезапустіть новий слуховий апарат та натисніть на створення пари. Якщо у вас два слухових апарати, треба натиснути двічі.

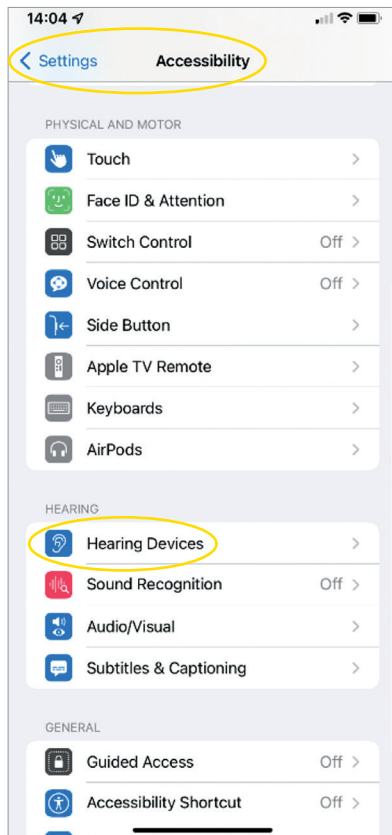


Як використовувати функцію «хендс-фрі» на iPhone® та iPad® з danalogic Extend

Переконайтеся, що пристрій є сумісним, на нашому сайті:

www.danalogic.co.uk/connectivity

1. Функція	Дії
Відповідь на виклик	Коротке натискання кнопки на слуховому апараті або проведення пальцем на iPhone/iPad
Завершення виклику	Натисніть та утримуйте кнопку слухового апарата протягом кількох секунд, щоб завершити виклик. Також можна завершити, торкнувшись червоної кнопки на екрані
Другий вхідний виклик	Якщо ви відповіли на виклик і отримуєте другий виклик, відхиліть його за допомогою довгого натискання на кнопку слухового апарата або торкнувшись «Відхилити» на екрані iPhone або iPad
Зміна гучності	Використовуйте кнопки гучності на iPhone або iPad
Вимикання функції «хендс-фрі» в налаштуваннях слухового апарата в iOS	Тричі натисніть кнопку iPhone, щоб перейти до налаштувань слухового апарата в iOS (ви також можете отримати доступ через Центр керування). Оберіть «Вхід», потім «Вимк»


КНОПКА СЛУХОВОГО АПАРАТА

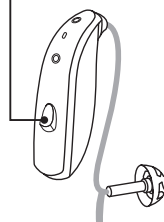

Відскануйте QR-код, щоб перейти до відеоінструкції, або відвідайте:
danalogic.co.uk/patient-portal

Як з'єднати слуховий апарат з вашим пристроєм Android™

1. Перейдіть до Google Play, знайдіть BeMore та завантажте додаток.
2. Після завантаження відкрийте додаток та торкніться «Початок роботи».
3. Дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб підключитися до додатка. Тепер все готово до роботи.

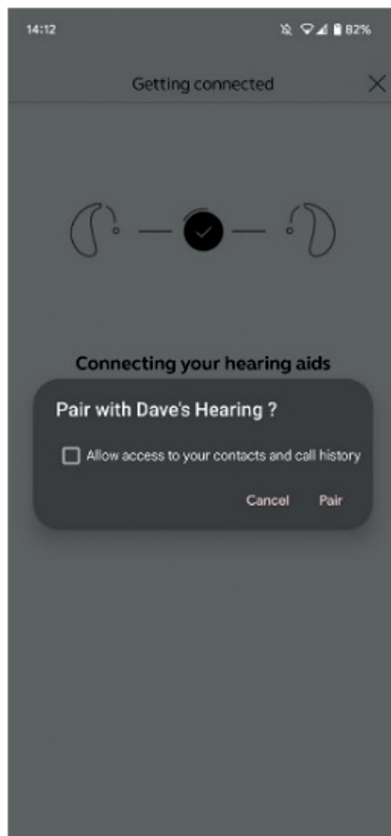

Якщо треба повторно з'єднати пристрій Android

Якщо один або обидва слухові апарати були замінені, вам треба повторно з'єднати їх з вашим пристроєм.

1. Проведіть зверху вниз по екрану, щоб відкрити меню «Параметри», потім утримуйте значок Bluetooth протягом 2 секунд.
2. Утримуйте значок «Параметри» для слухового апарата протягом 2 секунд.
3. Оберіть «Забути».
4. Відкрийте додаток BeMore.
5. Відкрийте меню BeMore та оберіть «З'єднати новий слуховий апарат». Потім дотримуйтеся інструкцій на екрані для підключення. Тепер все готово до роботи.



Якщо у вас виникли труднощі, зайдіть на наш сайт **www.danalogic.co.uk/patient-portal**, щоб отримати додаткову інформацію, або зверніться до аудіолога.



Відскануйте для прямого доступу до підтримки слухового апарата, вказівок з догляду, відеоінструкцій тощо.

© 2024 GN Hearing A/S. Всі права захищено. Danalogic – це торгова марка GN Hearing A/S. Apple, логотип Apple, iPhone, iPad та iPod touch є торговими марками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах. App Store – це знак обслуговування Apple Inc., зареєстрований в США та інших країнах. Android, Google Play та логотип Google Play є торговими марками Google LLC. Словесний знак Bluetooth та логотипи є зареєстрованими торговими марками, якими володіє Bluetooth SIG, Inc. Словесний знак Auracast та логотипи є торговими марками, якими володіє Bluetooth SIG, Inc.



Danalogic from GN краще працює, щоб забезпечити позитивні результати протягом всього періоду використання, щоб у NHS була змога надавати кращий догляд, коли це насправді важливо.

Danalogic є частиною GN Group – революційний звук від найкращих в світі слухових пристроїв до офісної гарнітури Jabra та спортивних навушників. Засновано в 1869 році, має понад 5000 співробітників. GN озвучує життя.

www.danalogic.co.uk



GN Hearing UK Ltd.
Unit 13,
Talisman Business Centre,
Bicester OX26 6HR
Тел.: +44 1869 352 800
Факс: +44 1869 343 466
danalogicuk@gnhearing.com
www.danalogic.co.uk