


danalogic GN

danalogic Extend

آپ کا نیا Bluetooth®
کم انرجی والی آڈیو کے
آلہ سماعت

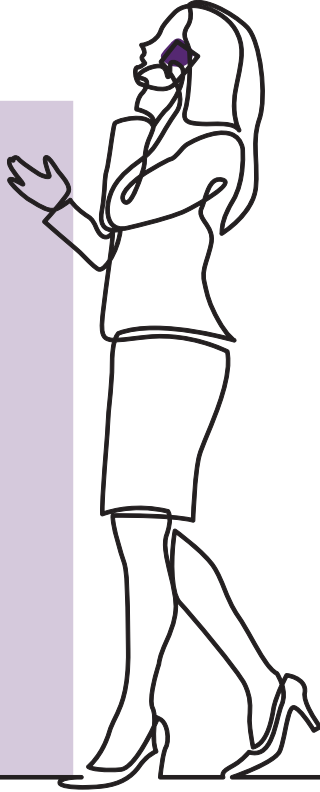

آپ کے نئے danalogic Extend آلہ سماعت، جو بالکل نئے Bluetooth® کی کم انرجی والے آڈیو پروٹوکول کو شامل کرنے کے لیے ہماری پہلی NHS رینج ہے

Bluetooth LE Audio کو صارفی الیکٹرانکس انڈسٹری اور آلہ سماعت بنانے والوں کے تعاون سے تیار کیا گیا تھا۔ Bluetooth LE Audio کو کم انرجی، کھپت، آڈیو کے اعلیٰ معیار، اور بہت کم لیٹنسی کے لیے بہتر بنایا گیا ہے۔ Bluetooth LE Audio کی مدد سے ٹیلی ویژن، لیپ ٹاپ یا Bluetooth 5.3 سے مطابقت پذیر دیگر ڈیوائسز سے آلہ سماعت تک براہ راست کنیکشنز قائم کرنا ممکن ہوگا۔ danalogic extend میں یہ نیا پروٹوکول بطور ڈیفالٹ بنایا گیا ہے اور اسے اوراکاسٹ براڈکاسٹ اسٹریمز سے بھی مربوط کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رابطے کے لحاظ سے یہ آپ کے مریضوں کے لیے حقیقی طور پر مستقبل کا مستند حل ہے۔

یہ سب یونٹس کو مربوط کرنے کے لیے کسی انٹرمیڈیٹ ڈیوائس کی ضرورت کے بغیر ہوتا ہے۔ Bluetooth کی کم انرجی والی ٹیکنالوجی کی بدولت، آپ بیٹری کی میعاد کو بچاتے ہوئے پورا دن اسٹریم کر سکتے ہیں۔

مطابقت پذیر سمارٹ ڈیوائسز کی فہرست کے لیے براہ کرم یہاں فہرست دیکھیں

www.danalogic.co.uk/connectivity

Danalogic Extend میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ یہ منتخب کردہ Apple® ڈیوائسز کے ساتھ ہینڈز فری کالنگ کی اجازت بھی دیتی ہے۔ ہینڈز فری کالنگ کی خصوصیت کی مدد سے آپ اپنے آلہ سماعت کا استعمال کرتے ہوئے فون کال کا جواب دے سکتے ہیں اور آپ کے آلہ سماعت آپ کی آواز کے لیے مائیکروفون کی طرح کام کریں گے، نیز آپ کو فون کی آواز براہ راست آلہ سماعت کی مدد سے سنائی دے گی۔ اس خصوصیت کے لیے مطابقت پذیر Apple ڈیوائسز کی فہرست کی غرض سے، براہ کرم یہاں ویب سائٹ پر جائیں

www.danalogic.co.uk/connectivity


کم انرجی والے Bluetooth آلہ سماعت کے فوائد

- کان میں آلہ سماعت لگائے ہوئے فون کالز سننا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کے نئے آلہ سماعت آپ کو فون اور ویڈیو کالز دونوں براہ راست سننے کی اجازت دیں گے۔ جو بات کہی جا رہی ہے یہ اس کو سننا آسان بنا دیتا ہے۔
- اب آپ کو اپنی اسمارٹ ڈیوائس سے موسیقی، ویڈیوز یا دیگر آڈیو سننے کے لیے ہیڈ فونز کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آواز براہ راست آپ کے آلہ سماعت کے ذریعے پہنچائی جائے گی۔




Bluetooth اسٹریمنگ کے لیے اپنے آلہ سماعت کو منسلک کرنا

اگر آپ کے پاس مطابقت پذیر اسمارٹ ڈیوائس ہے، تو براہ کرم اس سے آلہ سماعت کو منسلک کرنے کے لیے اس کتابچے میں موجود ہدایات پر عمل کریں۔


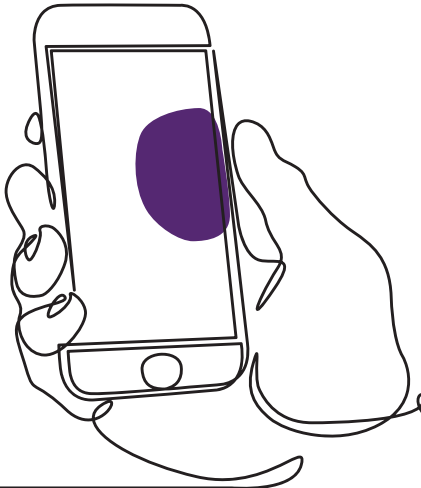


اپنی Apple ڈیوائس کے ساتھ اپنے آلہ سماعت کو کیسے پیئر کریں

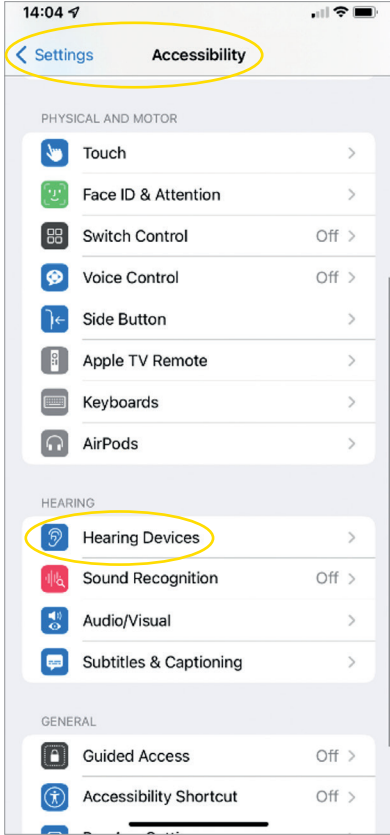

1. اپنے آلہ سماعت کو آف کریں۔
2. اپنی Apple ڈیوائس کی 'ترتیبات' کے مینو میں جا کر Bluetooth آن کریں۔ جب آپ Bluetooth فعال کریں گے تو سلائیڈر سبز ہو جائے گا۔
3. ترتیبات کے مرکزی مینو میں واپس جائیں اور پھر 'رسانی پذیری' پر ٹیپ کریں۔
4. نیچے اسکرول کر کے 'سماعت کی ڈیوائسز' پر جائیں۔
5. اگر آپ کے آلہ سماعت پہلے سے آن ہیں، تو براہ کرم انہیں ری اسٹارٹ کریں۔ بصورت دیگر، براہ کرم اپنے آلہ سماعت آن کریں۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ کی Apple ڈیوائس آپ کے آلہ سماعت کا پتہ لگا رہی ہے۔




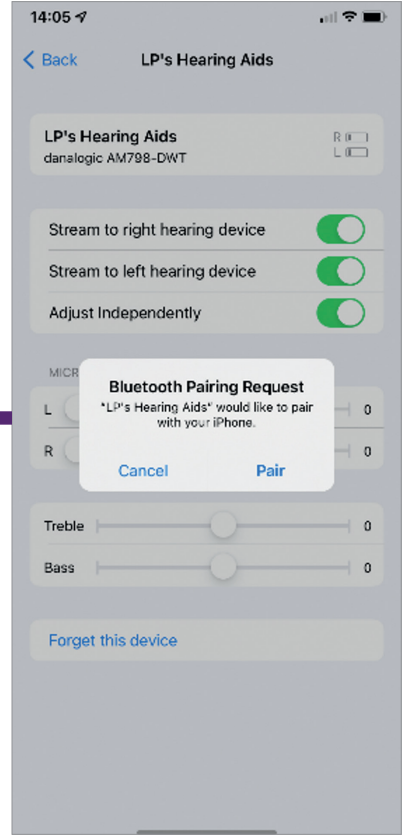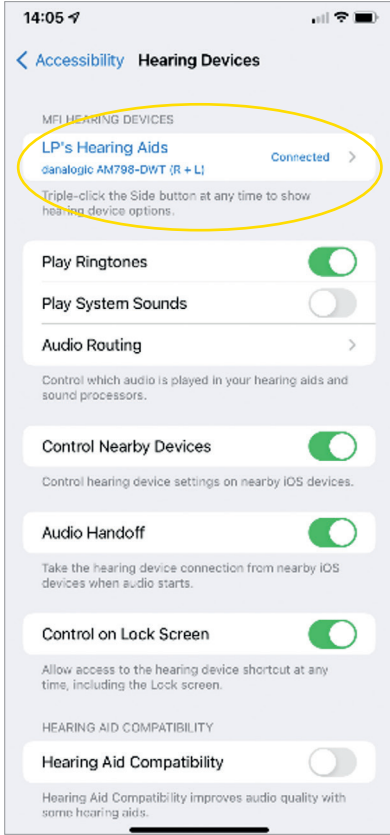

1. 'پیئر' پر کلک کریں۔ اگر آپ کے دو آلہ سماعت ہیں، تو آپ کو دو مرتبہ قبول کرنا ہوگا۔
2. App Store پر جائیں اور اپنے آلہ سماعت کے لیے 'BeMore' تلاش کریں۔
3. BeMore ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس کو کھولیں اور 'شروع کریں' پر ٹیپ کریں۔
4. ایپ سے مربوط کرنے کے لیے اسکرین پر دی گئی ہدایات فالو کریں۔ اب آپ اس عمل کے لیے تیار ہیں۔

نوٹ کریں: یہ مراحل ہیں اور یہ iOS 13 اور نئے ورژن میں کیسے کام کرتے ہیں

اگر آپ کو اپنی Apple ڈیوائس سے دوبارہ پیئر کرنے کی ضرورت ہو

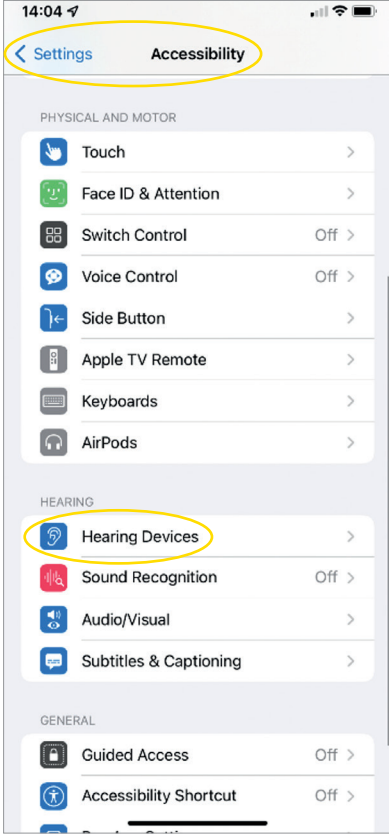

اگر آپ کا ایک یا دونوں آلہ سماعت تبدیل ہو گئے ہیں، تو آپ کو انہیں اپنی اسمارٹ ڈیوائس سے دوبارہ پیئر کرنا ہو گا۔

1. ترتیبات کے مینو میں جا کر پرانے آلہ سماعت کو ہٹانے سے شروع کریں۔

2. نیچے اسکرول کریں اور 'رسائی پذیری' منتخب کریں۔

3. 'سماعت کی ڈیوائسز' منتخب کریں۔


4. اسکرین پر 'MFI' سماعت کی ڈیوائسز 'سیکشن کے تحت آلہ سماعت منتخب کریں اور 'اس ڈیوائس کو بھول جائیں' پر ٹیپ کریں۔

5. اپنے نئے آلہ سماعت ری اسٹارٹ کریں اور 'پیئر' دبائیں۔ دو آلہ سماعت استعمال کرنے کی صورت میں آپ کو 'پیئر' پر دو مرتبہ ٹیپ کرنا ہو گا۔

danalogic Extend کے ساتھ iPhone® اور iPad® کی ہینڈز فری کالز سے کیسے لطف اندوز ہوں

براہ کرم ہماری ویب سائٹ www.danalogic.co.uk/connectivity پر جا کر یقینی بنائیں کہ آپ کی ڈیوائس مطابقت پذیر ہے

آلہ سماعت کا بٹن

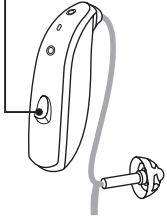

فنکشن	طریقہ کار
کال کا جواب دیں	اپنے آلہ سماعت کا بٹن چند لمحوں کے لیے دبائے رکھیں یا iPhone/iPad پر جواب دینے کے لیے سلائیڈ کریں
کال ختم کریں	کال بند کرنے کے لیے اپنے آلہ سماعت کا بٹن کچھ سیکنڈز کے لیے دبا کر رکھیں۔ متبادل طور پر، اپنی اسکرین پر سرخ بٹن پر ٹیپ کر کے کال منقطع کریں
دوسری آنے والی کالز	اگر آپ کال پر بات کر رہے ہوں اور آپ کو دوسری کال آ رہی ہو، تو اپنے آلہ سماعت کے بٹن کو تھوڑی زیادہ دیر کے لیے دبا کر اسے مسترد کریں یا iPhone یا iPad اسکرین پر 'مسترد کریں' پر ٹیپ کریں
والیوم تبدیل کریں	iPhone یا iPad پر والیوم زیادہ یا کم کرنے والے بٹنز استعمال کریں
iOS آلہ سماعت کی ترتیبات میں ہینڈز فری کالز کو آف کریں	iOS آلہ سماعت کی ترتیبات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے iPhone پر بٹن پر تین مرتبہ کلک کریں (آپ کنٹرول سینٹر کے ذریعے بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں)۔ 'ان پٹ اختیارات' پھر 'آف' منتخب کریں

ویڈیو تک کیسے رسائی حاصل کرنے یا وزٹ کرنے کے لیے کوڈ اسکین کریں:


danalogic.co.uk/patient-portal



اپنی Android™ ڈیوائس کے ساتھ اپنے آلہ سماعت کو کیسے پیئر کریں



1. Google Play Store پر جائیں، BeMore تلاش کریں اور ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔
2. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد، ایپ کھولیں اور 'شروع کریں' پر ٹیپ کریں۔
3. ایپ سے مربوط کرنے کے لیے اسکرین پر دی گئی ہدایات فالو کریں۔ اب آپ اس عمل کے لیے تیار ہیں۔

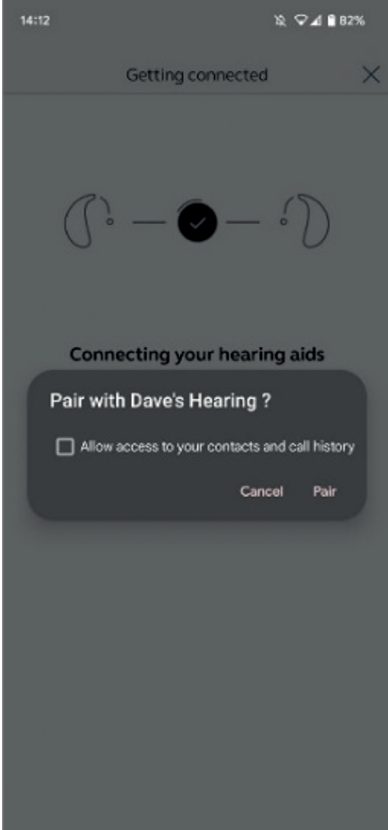

اگر آپ کو اپنی Android ڈیوائس سے دوبارہ پیئر کرنے کی ضرورت ہے

اگر آپ کا ایک یا دونوں آلہ سماعت تبدیل ہو گئے ہیں، تو آپ کو انہیں اپنی اسمارٹ ڈیوائس سے دوبارہ پیئر کرنا ہو گا۔

1. 'ترتیبات' کا مینو کھولنے کے لیے اسکرین پر اوپر سے نیچے کی طرف سوائپ کریں، پھر Bluetooth آئیکون کو 2 سکینڈز کے لیے دبا کر رکھیں۔

2. آلہ سماعت کے لیے ترتیبات کے آئیکون کو 2 سکینڈز تک دبا کر رکھیں۔

3. 'بھول جائیں' منتخب کریں۔

4. BeMore ایپ کھولیں۔

5. 'BeMore مینو' کھولیں اور 'نئے آلہ سماعت پیئر کریں' منتخب کریں۔ پھر مربوط کرنے کے لیے اسکرین پر موجود ہدایات کو فالو کریں۔ اب آپ اس عمل کے لیے تیار ہیں۔



اگر آپ کو مشکلات کا سامنا ہے، تو مزید
رہنمائی کے لیے براہ کرم ہماری ویب سائٹ
www.danalogic.co.uk/patient-portal چیک کریں یا
اپنے آڈیولوجیسٹ سے رابطہ کریں۔

آلہ سماعت سے متعلق معاونت،
نگہداشتی ہدایات، طریقہ کار سے متعلق
ویڈیوز اور مزید چیزوں تک فوری رسائی
کے لیے مجھے اسکین کریں۔



© 2024 GN Hearing A/S. جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ Danalogic GN Hearing A/S کا ٹریڈ مارک
ہے۔ Apple، Apple، لوگو، iPad، iPhone اور iPod ٹچ Apple Inc. کے ٹریڈ مارکس ہیں، جو امریکہ اور
دیگر ممالک میں رجسٹرڈ ہیں۔ App Store Apple Inc. کا سروس مارک ہے، جو امریکہ اور دیگر ممالک
میں رجسٹرڈ ہے۔ Android، Google Play اور Google LLC لوگو Google LLC کے ٹریڈ مارکس ہیں۔
Bluetooth ورڈ مارک اور لوگو رجسٹر کردہ ٹریڈ مارکس ہیں جو Bluetooth SIG، Inc. کی ملکیت ہیں۔
اوراکاسٹ ورڈ مارک اور لوگو Bluetooth SIG، Inc. کی ملکیت والے ٹریڈ مارکس ہیں۔



GN کی جانب سے Danalogic مریض کی تندرستی کے مکمل سفر میں مثبت نتائج لا رہا ہے، جس سے NHS کو وہاں بہترین نگہداشت کی فراہمی میں مدد مل رہی ہے جہاں اس کی واقعی ضرورت ہے۔

Danalogic GN گروپ کا حصہ ہے – جو کہ دنیا کی معروف سماعت کی ڈیوائسز سے لے کر Jabra آفس کے ہیڈسیٹس اور اسپورٹس ہیڈ فونز تک بہترین آواز کا علمبردار ہے۔ 1869 میں قائم کردہ اور 5,000 سے زائد افراد کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ GN زندگی کو بہتر بناتا ہے۔

www.danalogic.co.uk



GN Hearing UK Ltd.
Unit 13,
Talisman Business Centre,
Bicester OX26 6HR
ٹیلی فون: +44 1869 352 800
فیکس: +44 1869 343 466
danalogicuk@gnhearing.com
www.danalogic.co.uk