
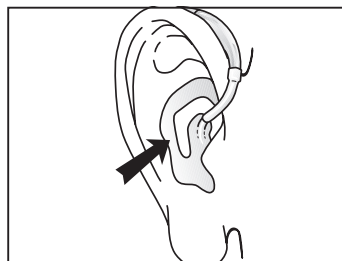
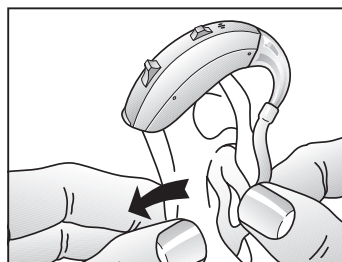


Zakładanie i wyjmowanie wkładki usznej

- 1 Należy przytrzymać wkładkę między kciukiem a palcem wskazującym i umieścić jej wylot dźwięku w przewodzie słuchowym.
- 2 Należy wsunąć wkładkę aż do ucha delikatnym, przekręcającym ruchem.
- 3 Należy obrócić górną część wkładki do ucha delikatnie do tyłu i do przodu tak, aby przylegała za fałd skórny nad kanałem słuchowym.
- 4 Należy przesunąć wkładkę w górę i w dół i delikatnie ją nacisnąć, aby upewnić się, że jest prawidłowo umieszczona w uchu. Otwieranie i zamykanie ust może ułatwić wkładanie.
- 5 Należy upewnić się, że aparat słuchowy znajduje się za uchem.



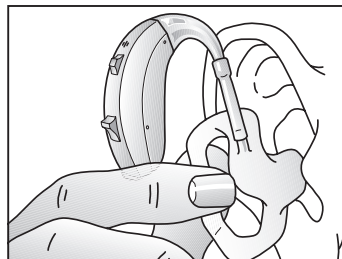


Eksperymentując, łatwiejsza metoda może zostać odkryta. Przy prawidłowym założeniu aparaty słuchowe powinny być dobrze, ale wygodnie dopasowane. Jeśli aparaty słuchowe powodują podrażnienie uszu, skontaktuj się z protetykiem słuchu.

Czyszczenie wkładek usznych

- 1 Przed czyszczeniem należy wyjąć wkładkę uszną i dołączone rurki z aparatów słuchowych.
- 2 Należy oczyścić wkładkę używając łagodnego mydła i spłukać ją letnią wodą.
- 3 Po wyczyszczeniu, należy wysuszyć wkładki dokładnie i usunąć wszelkie pozostałości wody i zanieczyszczeń z rurki przy użyciu bańki powietrznej, pętli z drutu lub energicznie potrząsając wacikiem w celu usunięcia wody.

i Rurki z wkładką mogą stać się sztywne, kruche lub odbarwione w miarę upływu czasu. Skontaktuj się z protetykiem słuchu w sprawie wymiany rurki.

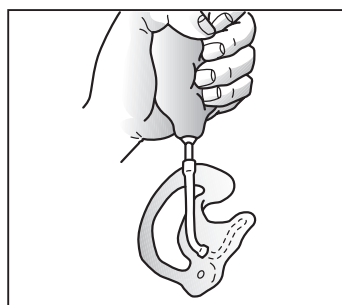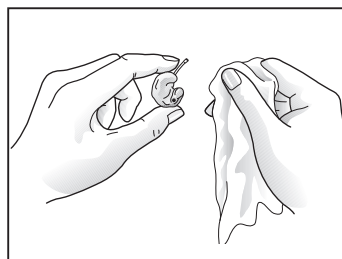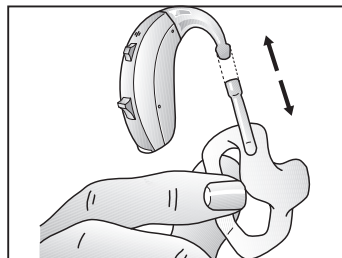

Dane kontaktowe audiologa: