


# Cienkie rurki

## Czyszczenie cienkich rurek i słuchawki


- 1 Należy zdjąć cienkie przewody z aparatów słuchowych przed ich wyczyszczeniem i odkręcając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- 2 Należy przetrzeć cienkie rurki i słuchawkę wilgotną ściereczką.
- 3 Aby oczyścić cienką rurkę z wilgoci i zanieczyszczeń, należy wcisnąć czarny pręt czyszczący przez cienką rurkę, rozpoczynając od końca słuchawki.

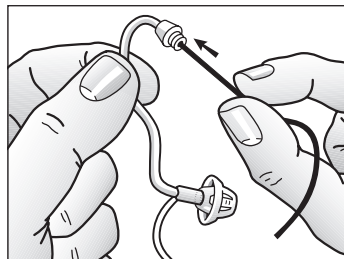

**i** *Systemy cienkich rurek i słuchawki należy wymienić, gdy elementy staną się sztywne, kruche lub zagięte.*

## Wymiana cienkich rurek

- 1 Należy zdjąć cienkie przewody z aparatów słuchowych, odkręcając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- 2 Należy przyłączyć nową cienką rurkę, przykręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

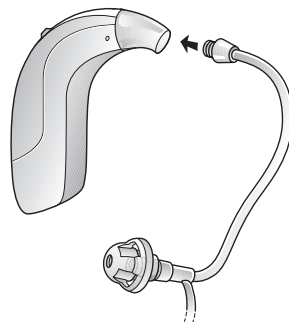

## Słuchawki zastępcze

Zaleca się, aby protetyk słuchu zmienił słuchawkę, ponieważ nieprawidłowa jej wymiana może spowodować wypadnięcie słuchawki z ucha.

Dane kontaktowe audiologa: